

医療用品（06）視力表及び色盲検査表 一般医療機器

一般的名称：視力表 JMDN コード：16800000

視力検査装置

【禁忌・禁止】


- ・ 熟練したもの以外は使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体、コントロールユニット及び付属品（電球/12V, 5W：5 個、ヒューズ/125V, 3A：2 本、コントロールユニットスタンド：1 個、手持ち偏光メガネ：1 個）により構成される。また、視標の組合せの異なるモデル：TCU-600 及び TCU-550 の 2 種類がある。

2. 形状

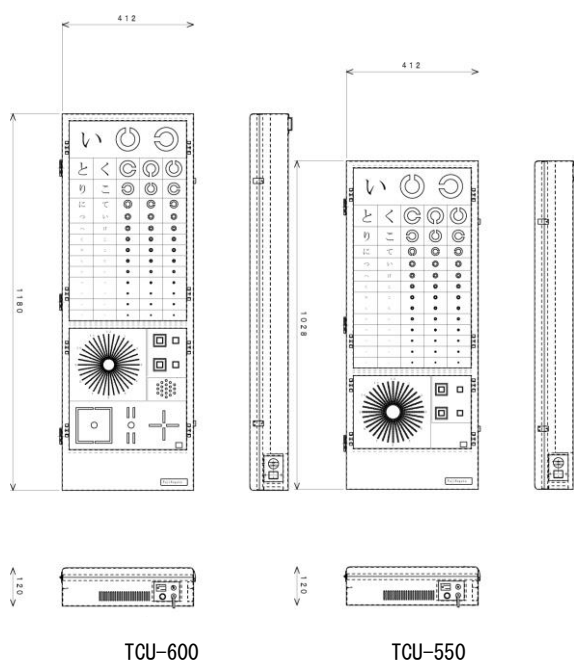

3. 電氣的定格

本体、コントロールユニット

- (1) 定格電圧：AC100V 50Hz/60Hz、DC6.0V（単一乾電池 4 本）
- (2) 定格消費電力：160VA
- (3) 電撃に対する保護の型式：クラス I 機器、内部電源機器
- (4) 電撃に対する保護の程度：B 形装着部、B 形装着部

4. 動作原理

背景照明によって視標上の個々の文字又は記号を選択的に表示する。

*【使用目的又は効果】

視力検査に用いる視力表である。

*【使用方法等】

1. 本体操作方法

- ① 電源コードを AC100V, 15A のコンセントに接続する。
- ② 電源スイッチを押し、電源を投入する。

マドックス用固視点が点灯しコントロールユニットでの操作が可能になる。

マドックス用固視点が点灯した場合は、切替スイッチを REM に合わせる。

2. コントロールユニット操作方法

- ① 電源スイッチを ON にする。
- ② 有線による送受信の場合は本体の有線入力端子とコントロールユニット有線出力端子をケーブルで接続する。

3. 本体単独での操作方法

- ① 切替スイッチのつまみを右に回転させると順次、視標の左側より一列目、二列目、三列目、四列目、五列目、乱視視標、赤緑視標、点群視標、十字視標、立体視視標、不等像斜位指標が点灯する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 熟練者以外は使用しないこと。
- (2) アースを正しく接続すること。
- (3) 診断に必要な時間を越えないようにすること。
- (4) 故障した時は勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
- (5) 改造しないこと。
- (6) その他の使用時の注意事項は、使用説明書に従う。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

不二光学機械株式会社

電話番号：048-929-3511

2. 製造業者

不二光学機械株式会社