

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001
リカバリーウェアTP

【禁忌・禁止】


- ・湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある場合は使用しないでください。
- ・異常（かゆみ、かぶれなど）を感じたら、ご使用を中止してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体

添付文書

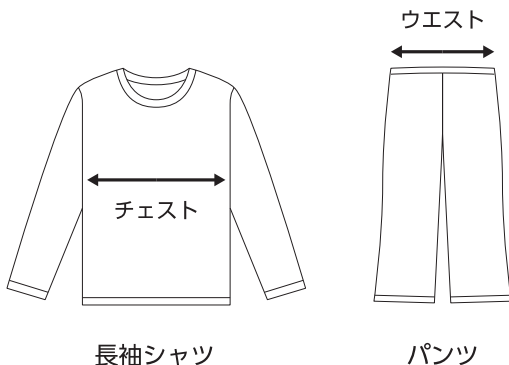

寸法 (単位: cm)		XS	S	M	L	XL
長袖シャツ	チェスト	72~80	80~88	88~96	96~104	104~112
	身長	145~155	155~165	165~175	175~185	
パンツ	ウエスト	60~68	68~76	76~84	84~94	94~104

2. 原理

本製品は原材料繊維に特殊加工を施し、一定程度の遠赤外線を輻射することにより遠赤外線の血行促進作用で、疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とする家庭用遠赤外線血行促進用衣である。

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進効果により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【使用方法等】

身体に合うサイズを選択し、素肌に直接接触させる形で着用する。

本品は再使用が可能。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- (1) 本品の使用により、痛みやかゆみ、しびれ、装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた患者
〔症状を悪化させる可能性があるため〕
- (2) 患部を冷却する必要があるけが等をしている患者
〔症状を悪化させる可能性があるため〕

2. 重要な基本的注意

- (1) サイズの合わないものは使用しないこと
〔血行が悪くなる恐れがあります〕
- (2) 折り返して使用しないこと
〔血行が悪くなる恐れがあります〕
- (3) 本品に、破損（ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着すること
- (4) 本品の形状を変えたりするなど、加工、修理を行わないこと
- (5) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（ほつれ、破れ等）することがあるので注意すること
 - ① 強く引っ張りあげての装着
 - ② 肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
 - ③ 鋭利なものへの接触

【保管方法】

高温多湿を避け、室温で暗所に保管すること

【耐用期間】

1年

【取り扱い上の注意】

- 1) 色の異なるものと一緒に長時間、洗液につけないでください。
- 2) 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 3) 乾燥機、アイロン等の強制乾燥はしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ピップ株式会社 連絡先(06-6945-4427)

住 所：奈良県天理市南六条町182番地(奈良工場)