

使用前に必ずこの台紙の表示を読み、充分理解した上で使用してください。また、必要な時に読めるよう、この台紙を保管してください。

フマキラー

鼻シャワー

ミストタイプ



風邪・花粉の季節に!

シュッとおすだけ! **簡単鼻洗浄**
やわらかミストで

* 体液に近いミストで 痛くない!

洗浄ミストの成分濃度がヒトの
体液に近いため、鼻粘膜の細胞
を刺激せず、ツーンとした痛みが
ありません。

※鼻腔内に傷がある場合はしみることがあります。

【類別及び一般的名称等】

一般医療機器 医療用洗浄器 鼻用洗浄器


【販売名】フマキラー鼻洗浄C2

【JMDNコード】41599000

【成分】精製水、塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na、グリセリン

【内容量】70mL(約500プッシュ分)

ユニバーサルデザイン採用

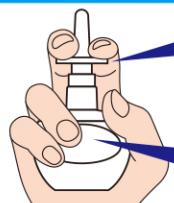

指をかける部分
が広く、スプレー
しやすい!

手のひらに
フィットするので、
握りやすい!

身体に作用しない成分のため、妊娠中の方・お子様にもお使いいただけます。




【禁忌・禁止】鼻の炎症がひどい時には使用をさけてください。

鼻腔内の洗浄以外には使用しないでください。

使用方法

- ①カバーキャップを取り外し、図のように持ってください。
- ②正面を向いたまま、ノズル先端を軽く鼻腔に入れ、ポンプを最後まで押して、左右それぞれ3プッシュ程度スプレーし、鼻腔内を洗浄してください。※スプレー中は息を吸い込まないでください。
- ③洗浄後は軽く鼻をかんでください。
- ④使用後はノズルの先をティッシュ等で拭き取り清潔にし、キャップを付けて保管してください。

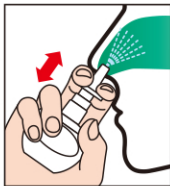

【使用の目安】1日3回程度

【使用方法に関する注意】最初に使用する際、液が出るまで数回カラ押しを行ってください。洗浄時、鼻腔から液が流れ出てきますので、ティッシュ等で押さえてご使用ください。

【使用上の注意】●使用中に万一異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談すること。●耳鼻に疾患のある方、病院で治療を受けている方は、使用前に医師に相談すること。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもと使用すること。●開封後は早めに使いきること。●鼻の炎症がひどい場合、鼻が充分にかめない場合は使用をさけること。●他の人と共用しないこと。

【保管及び取扱い上の注意】●小児の手の届かない所に保管すること。●直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所をさけ、涼しい所に保管すること。●他の容器に入れ替えたり、他の液を入れて使用しないこと。誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。

【廃棄上の注意】●廃棄の際は、地域の分別区分に従うこと。



①

【製造販売元】



フマキラー株式会社

〒739-0494 広島県廿日市市梅原1-11-13

【本社所在地】〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11

お客様相談室 ☎0077-788-555

☎03-3255-6400

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

【製造元】明星産商株式会社 高知工場