

類別：手術台及び治療台
一般医療機器 一般的名称：汎用診療・処置台(JMDNコード:13958000)

スケール付多目的ベッド FB-C4DS-00

【警告】


- ベッドを操作する前に必ず本取扱説明書を読むこと。
- ベッドを移動するときは、適切な高さにし、電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 使用時は必ずキャスターをロックすること。
- 指定の付属品、オプション品以外は使用しないこと。
- マットレス最大厚さは 150mm 以内を使用すること。
- 正常に動作しないときは電源プラグをコンセントから抜くこと。
- カールコードは過度に伸ばさないこと。
- 電源ケーブルに損傷がある場合は、ただちに使用をやめ、修理の依頼をすること。
- 使用しないときは、ベッドは最低位置にすること。
- 医者の指示に従い背和え、脚上げ、傾斜機能を使用すること。
- CPU レバーの背もたれ解除は、背もたれが素早く降下するため身体や他機器を挟まないよう注意すること。
- 電源コードは引っ張って抜かないこと。
- お手入れは電源プラグを抜いてから行うこと。

【禁忌・禁止】

- 可燃性ガスがある場所では使用しないこと。
- 手術室で使用しないこと。
- 2人以上で使用しないこと。
- 電源プラグをマットレスの上に載せないこと。
- 操作中に他機器のケーブルが機構部及び可動部に挟まらないようにすること。
- バッテリーは火気を避け、また液体で濡らさないこと。
- サイドレールを持ち、ベッドを移動させないこと。

【形状・構造及び原理等】

(1) 外観図

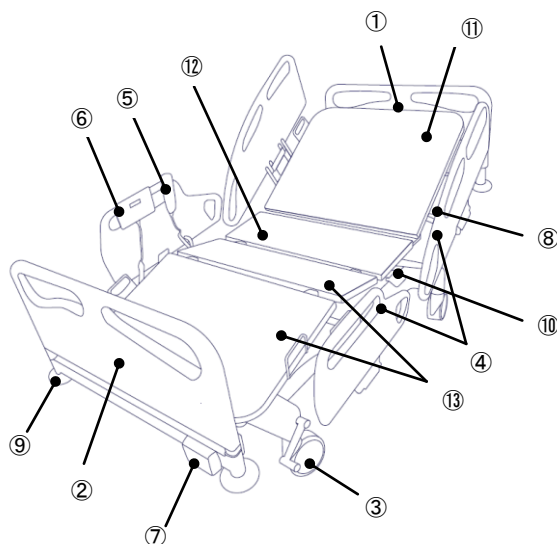

①	ヘッドボード	⑧	サイドパネルスイッチ
②	フットボード	⑨	バンパー
③	キャスター	⑩	CPR レバー
④	サイドレール	⑪	背部
⑤	手元スイッチ	⑫	腰部
⑥	スケールコントローラー	⑬	脚部
⑦	操作スイッチ		

(2) 本体

寸 法：幅 1 0 1 0 × 長さ 2 1 8 5 × 高さ 4 9 0 ~ 8 9 0
(ストローク：4 0 0)

質 量：本体 約 2 0 0 (Kg)

材質、組成：一般工業材料、一般電気部品

(3) 付属品（オプション部品）

- ・IV ポール
- ・酸素ボンベホルダー

(4) 電気的定格

1. 電源

- 1) 定格電圧 AC 1 0 0 - 2 4 0 (V)、5 0 / 6 0 (Hz)
- 2) 電源入力 2. 5 (A)
- 3) 定格時間 2 分

2. 内部電源

- 1) 定格電圧：DC24V
- 2) バッテリー：鉛蓄電池、1. 3Ah

(5) 動作原理

本体内部に設置された 4 本のモーターを駆動部とし、手元スイッチより背部、脚部、昇降、傾斜を適切なポジションにできる。サイドレールは外側のレバーを引くことで格納し、引き上げることで使用できる構造、また透析や患者の体重管理等ができるよう、脚部にロードセルを組み入れることでベッドにしながら重量測定ができる構造になっている。

【使用目的、効能又は効果】

診療または処置のために用いる汎用の診療・処置台、またいくつかの基礎機能(昇降、傾斜)を備えるものもあり、診療室において用いられるものをいう。

【品目仕様等】

- 背部稼動角度：6 5 度（角度公差±3 度）
- 脚部稼動角度：3 5 度（角度公差±3 度）
- 昇降稼動高さ：4 0 0 mm（公差±2 0 mm）

【操作方法又は使用方法等】

使用前に取扱説明書をよく読み、正しく使用する。

(1) 操作方法の詳細については取扱説明書を参照する。

- 1) ベッド周辺に障害物がないか確認の上、キャスターをロックし、電源コードや手元スイッチのコードが各部に挟まっていないか確認の上、電源プラグをコンセントに差し込む。
- 2) 患者の乗り降りは、背部と脚部を下げ傾斜をフラットな状態にし、高さを適切な位置に調整すること。またサイドレールは、転落防止のために使用すること。
- 3) 手元スイッチやパネルスイッチ、フットコントローラーの各ボタンを操作して処置に合わせた適切なポジションをとる。
- 4) モーターユニットは定格があるので、連続では使用せず2分間使用したら18分間動作させない。

(3) 安全装置

- ・手元スイッチはモーメンタリー式。操作中のみ稼動。
- ・コントロールボックス内に過昇温度保護装置内蔵
- ・コントロールボックス内に過電流保護装置内蔵。

【使用上の注意】

- 1) 本ベッドの安全耐荷重は250 kgである。
患者の最大体重 185 kg + マットレス最大 20 kg + 付属品（取り付け部品の荷重も含む）45 kg = 合計 250 kg
- 2) 可燃性ガスがある場所では使用しないこと。
- 3) 屋内で床面の平らな場所で使用すること。
- 4) 医師の指導のもと使用すること。
- 5) 2人以上で使用しないこと。
- 6) 使用時はキャスターをロックし、動かないことを確認すること。
- 7) CPR レバーを操作する場合は周囲の人やものに注意して行うこと。
- 8) サイドレールを下げる場合は、サイドレールの下に人やものがないことを確認してから行うこと。
- 9) 手元スイッチやスケールコントローラーを落としたり、ふきずったり、ぬれた手で操作しないこと。
- 10) サイドレールの操作は、ベッドを使用している方が内側から使用させないこと。
- 11) 重量測定機能は、取扱説明書をよく読み操作してください。
- 12) 操作中に本ベッドの各ケーブル類及び他機器のケーブル類が可動部に挟まれないようにすること。
- 13) サイドレールを持ちベッドを移動させないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管条件〉

- (1) ベッドの高さを最下位にし、また背脚をフラットな状態で保管すること。
- (2) 次の場所では保管しない。
 - ・湿気の多い場所
 - ・暖房器具などの近くで直接高温になる場所
 - ・直射日光の長時間当たる場所
- (3) 耐用期間は製造出荷後8年：自主基準

【保守・点検に係る事項】

1) 業者による保守点検

本製品は、年に1回メンテナンスが必要なため、定期点検を弊社「お客様相談室」へ依頼すること。

2) 使用者による保守点検

「取扱説明書」のメンテナンス項目をもとに点検をすること。

注意)

研磨剤や研磨パッド、またフェノール系消毒剤は使用しないこと。

【包装】

1 梱包／1 台

【製造販売業者及び製造業者の指名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：

フランスベッド株式会社

住 所：東京都昭島市中神町1148番地5

電 話：042-543-3111

製造業：

フランスベッド株式会社 三重工場

住 所：三重県津市芸濃町棕本2020番地

電 話：059-265-3131

海外製造業者：

Caretek Medical PLC

住 所：CBL House, Guanqiao Shilou Town, Panyu District, Guangzhou Guangdong Province, China 511447

お問い合わせ先：

フランスベッド株式会社 お客様相談室

住 所：東京都昭島市中神町1148番地5

電 話：0120-39-2824