

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用眼科用ナイフ 32764002

マイクロフェザープラスチックハンドル

再使用禁止

【警告】


- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。[感染症を引き起こすおそれがある。]
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

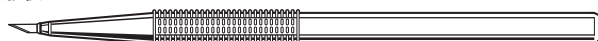


主な刃部形状による品番

ストレートナイフ




クレセントナイフ

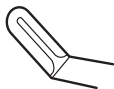

ラウンドナイフ



インプラントナイフ

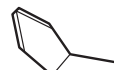

スリットナイフ



MVRナイフ



丸棒スリットナイフ



組成: 刃部/ステンレス鋼
コーティング/シリコーン
ピン/ポリカーボネイト
柄部/ABS樹脂
PBT樹脂

原理: 本品は、各種刃部形状を持つ眼科手術用のメスである。術者が刃先形状及び刃先を有用に利用し、目及びその周辺部位切開などの手術に使用するための単回使用眼科用ナイフである。

【使用目的又は効果】


眼科手術に使用すること。

【使用方法等】

包装を開封してケースから取り出し使用してください。

＜ケースからの取り出し方法＞

※収納はこの逆の手順

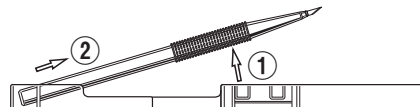

使用後は、ケースに収納して廃棄してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 軟骨・骨などの硬組織には使用しないこと。
[刃先が破損するおそれがある。]
- 他の医療機器と一緒に個別包装のまま再滅菌をする場合は＜お問い合わせ先＞に確認すること。
[滅菌方法により製品に支障をきたすおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 使用期限は製造日より5年。(自己認証による)

*例. ○○○○-△△-□□ は使用期限○○○○年△△月□□日を示す。

- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売元＞フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

＜製造元＞フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

＜お問い合わせ先＞フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917