

2017年4月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)
2007年8月(第1版)

製造販売認証番号 219AABZX00215000

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用メス 35130002

フェザーディスポーザブルスカルペルベッセル

再使用禁止

【警告】

- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。[感染症を引き起こすおそれがある。]
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状



主な刃部形状と品番



組成: 刃部/ステンレス鋼
柄部/AS樹脂

原理: 本品は、各種形状の刃部を持つ外科手術用のメスである。術者が刃先形状及び刃先を有用に利用し、手術に使用する単回使用メスである。


【使用目的又は効果】

外科手術に使用すること及び切離並びに検査、研究用試料及び物体の切断に使用すること。

【使用方法等】

刃先カバーを外して使用してください。

“SNAP”部分を折り、刃先カバーを外す。

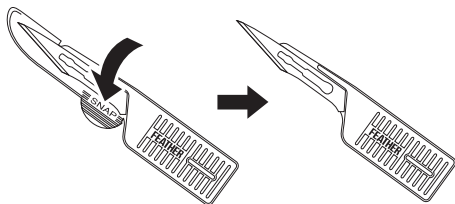

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 軟骨・骨などの硬組織には使用しないこと。[刃先が破損するおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【取扱い上の注意】

- 製造専用として使用される医療機器であるため、他の用途で使用しないこと。
- 未滅菌状態で市場へ流通させないこと。
- 高圧蒸気滅菌など高温(80℃以上)での滅菌を行わないこと。
- 滅菌方法については別途協議のうえ決定すること。
- 処置パック等に組み込む場合は、他の医療機器との接触に注意して包装すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917