

機械器具 47 注射針及び穿刺針  
管理医療機器 単回使用組織生検用針 12734010

## フェザー生検トレパン

再使用禁止

### 【警告】


- 針管は鋭利であるため、取り扱いに注意すること。  
[接触による穿刺等のおそれがある。]

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。[感染症を引き起こすおそれがある。]
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

形状

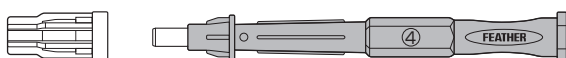

| 品番     | 針管サイズ(内径) |
|--------|-----------|
| FBP-15 | 1.5mm     |
| FBP-20 | 2.0mm     |
| FBP-30 | 3.0mm     |
| FBP-40 | 4.0mm     |
| FBP-50 | 5.0mm     |
| FBP-60 | 6.0mm     |

組成: 針管/ステンレス鋼  
柄/ABS樹脂  
キャップ/ポリエチレン樹脂

原理: 本品は、円筒状の刃部を持つパンチ式の皮膚トレパンである。  
術者が採取する組織の大きさに合わせ円筒の内径サイズを選択し、皮膚組織に穿刺し丸く切り抜き組織を採取する。


### 【使用目的又は効果】

検査、治療又は診断のため、人体に穿刺し、組織採取に使用する。


### 【使用方法等】

医師の判断により、組織を採取する皮膚の消毒、局所麻酔等、適切な前処置を行ってください。組織を採取した後は、圧迫、縫合等の適切な方法で止血してください。

1. 包装を開封して取り出す。

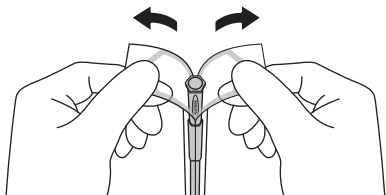

2. キャップを外し、皮膚へ穿刺し組織を採取する。

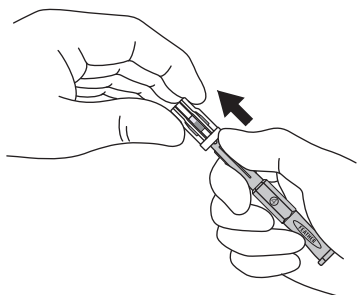

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- 穿刺時は皮膚組織の厚さや他の直下の組織に十分注意して使用すること。[深部組織(腱等)損傷のおそれがある。]

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 使用期限は製造日より5年。(自己認証による)  
\*例.  〇〇〇〇-△△-□□は使用期限〇〇〇〇年△△月□□日を示す。
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場  
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社  
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店  
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917