

器 7 6 医療用吸入器のうち、霧吹き式ネブライザー
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000

「エマジン コンプレッサー式ネブライザー ネブコン CN-3WAY」
「エマジン コンプレッサー式ネブライザー ネブコン CN-AC」
「エマジン コンプレッサー式ネブライザー ネブコンミニ CN-Mini」の付属品
ネブコンキット

TP-112

* 【警告】


- ・薬液の使用については、医師の指示に従ってください。
- ・お子様が使用の場合は保護者の監視のもとでご使用ください。
[使用方法]
- ・使用前に機能テストを行い、正常な作動を確認してください。

* 【禁忌・禁止】

- ・異なる機種の構成品を接続しないでください。

* 【形状・構造及び原理等】

形状・構造

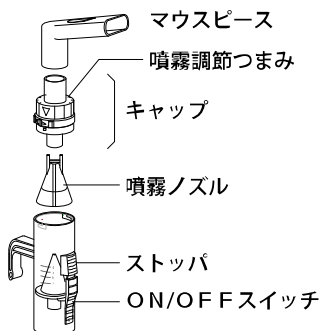

組成

ポリプロピレン樹脂／ポリサルホン樹脂

仕様

噴霧能力 : 0.3 mL / min*

噴霧粒子径 : 1 ~ 8 μm*

薬液槽容量 : 8 mL

※使用する薬液、濃度等により異なる場合があります。

* 【使用目的又は効果】

本器は、患者に吸入させるため、エアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置です。

* 【使用方法等】

準備

- 1) ご使用の前に、ネブライザー本体付属の取扱説明書を参照し、洗浄してください。
- 2) キャップを回転させて取り外し、薬液槽本体から噴霧ノズルを取り出してください。
- 3) 薬液槽本体に薬液を注入してください。
- 4) 薬液槽本体に噴霧ノズルを固定して、キャップを回転させてしっかりと組付けてください。
- 5) ネブライザー本体と確実に接続してください。

使用方法

- 1) ON/OFFスイッチをONにし、吸入を開始します。
- 2) 又は、ストッパーを押し下げ、ON/OFFスイッチを固定し、吸入を開始します。
- 3) 途中で中断する場合は、ON/OFFスイッチをOFFにしてください。

使用後の処理

- 1) キャップを回転させて取り外し、薬液槽本体から噴霧ノズルを取り出してください。
- 2) 薬液槽本体に残った薬液を捨て、ぬるま湯を注入してください。
- 3) 薬液槽本体に噴霧ノズルを固定して、キャップを回転させてしっかりと組付けてください。
- 4) 噴霧ノズルの詰まり防止の為、ぬるま湯を噴霧してください。
- 5) 次回の使用に備え、清掃を実施してください。
(ネブライザー本体付属の取扱説明書を参照してください。)

* 【使用上の注意】

- ・初めて使用する時や長期保管後は洗浄・消毒を行ってください。
- ・構成品を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

輸送及び保管環境条件

周囲温度範囲 -20 ~ +60℃

相対湿度範囲 10 ~ 95% (非結露)

耐用期間

1年 (自己認証による)

* 【保守・点検に係る事項】

- ・取扱説明書をご参照ください。

使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。
- ・使用前に作動することを確認する。

業者による保守点検事項

- ・一年毎に破損や汚れがないことを確認する。
- ・一年毎に作動することを確認する。

洗浄・消毒

- 1) 分解して洗浄してください。
- 2) 下記の条件を守り、消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させ、正しく組み立て正常な働きが得られるようにしてください。

[オートクレーブ]

※取扱説明書をご参照ください。

[推奨薬剤]

- ・消毒用アルコール
- ・次亜塩素酸ナトリウム

※使用後は薬剤を洗い流してください。

* * * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

TEL : 049-243-9939

www.bluecross-e.co.jp

販売業者 (販売店)