

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 耳鼻咽喉科用カテーテル 16432001

みえーるキット

TP-129

【警告】

- ・本器は未滅菌品です。
- [適用対象（患者）]
- ・患者に適したサイズを選択してください。
- [使用方法]
- ・誤った使い方をすると鼓膜や本品接触部の粘膜を損傷する恐れがあります。


【禁忌・禁止】

- ・エチレンオキシドガス等のガス滅菌は本品内に残留したガスが体へ悪影響を及ぼす恐れがあるため行わないでください。
- ・採血用には使用しないでください。
- ・変形するため過度に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- [シリコン吸引チューブ]
- ・口腔内等に挿入しないでください。

【形状・構造及び原理等】


形状・構造

シリコンオリーブ管 みえーる

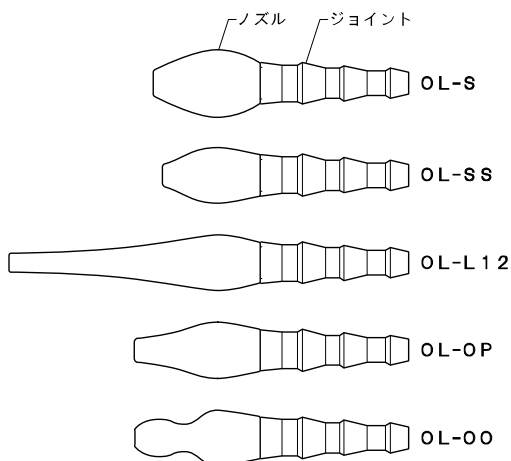

型番	シリコンオリーブ管 みえーる	
	型番	寸法 (mm) ※±5%mm
MK-S	OL-S	14.5×55.0
MK-SS	OL-SS	12.0×53.0
MK-L12	OL-L12	12.0×86.0
MK-OP	OL-OP	12.0×59.0
MK-OO	OL-OO	12.0×59.0

シリコン吸引チューブ

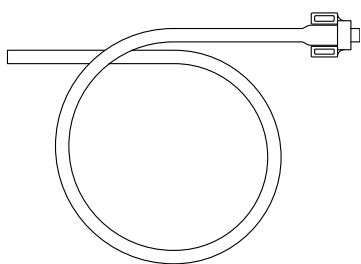

組成（シリコンオリーブ管 みえーる）

ノズル：シリコンゴム
ジョイント：ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

管状の器具で、吸引のために使用する。本品は洗浄・滅菌後に再使用可能である。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 患者に適したサイズのシリコンオリーブ管 みえーるを選択してください。
- 2) シリコンオリーブ管 みえーるをシリコン吸引チューブに接続してください。
- 3) シリコン吸引チューブを医療用吸引器に接続してください。
- 4) 吸引を行ってください。

使用後の処理

- 1) 水を吸引しシリコンオリーブ管 みえーる内、シリコン吸引チューブ内の吸引物を除去してください。
- 2) 医療用吸引器からシリコン吸引チューブを取り外してください。
- 3) シリコンオリーブ管 みえーる、シリコン吸引チューブを分解し、洗浄、消毒を行ってください。

〈併用医療機器〉

本品の吸引源として併用可能な医療機器は、製造販売業者へお問い合わせください。

【使用上の注意】

使用前に洗浄による浄化又は消毒を行ってください。

※本品はシリコンゴム自体の臭いがありますが徐々になくなります。また人体に影響を及ぼすことはありませんが、気分が悪くなるようであればご使用をお止めください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

耐用期間

シリコンオリーブ管 みえーる：2年（自己認証による）
シリコン吸引チューブ：1年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。

業者による保守点検事項

- ・一年毎に破損や汚れがないことを確認する。

洗浄・消毒

- 1) 分解してください。
- 2) 洗浄・消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させてください。
- 4) 次回の使用に備え、部品を正しく接続してください。

【推奨薬剤】

- ・消毒用アルコール
- ・次亜塩素酸ナトリウム

※使用後は薬剤を洗い流してください。

※薬剤により変色等の変化がある場合があります。

【煮沸消毒】（シリコンオリーブ管 みえーるに限る）

100℃ 30分まで

※洗剤、薬剤等の同時使用はしないでください。

※煮沸によりノズルは白化することがありますが、後に透明度は概ね回復します。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

TEL：049-243-9939

www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）