

器 5 5 医療用洗浄器
一般医療機器・特定保守管理医療機器 骨粉収集器 17131000

サクションフィルタ

再使用禁止

TP-130

【警告】

[使用方法]

- ・火気に近づけないでください。


* 【禁忌・禁止】

- ・本器は再使用しないでください。
- ・病院の中央配管以外の吸引源には接続しないでください。
- ・ -7.0 kPa 以上の吸引圧力で使用しないでください。

* * * 【形状・構造及び原理等】

形状・構造

①本体 ②フィルタ（体内内） ③吸引コネクタ ④フィルタプラグ

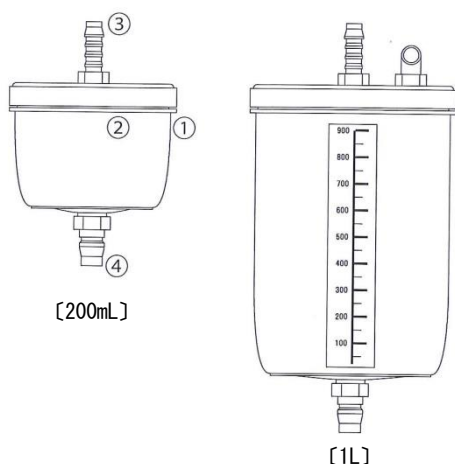

原理

フィルタプラグを吸引装置の吸引ソケットに接続し、本体内部を陰圧にする。吸引コネクタから本体内部に吸引物を吸引し、吸引物に含有されるフィルタの孔径より大きな骨片をフィルタで収集する。液体物はフィルタを通過し、フィルタプラグから排出される。

【使用目的又は効果】

整形外科手術時に骨片を収集するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 吸引装置の吸引ソケットにフィルタプラグを接続してください。
- 2) 吸引コネクタに吸引器具を接続してください

* 【使用上の注意】

- ・構成部品等を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。
- ・病院の中央配管からの吸引圧 (-70 kPa 以下) を使用してください。
- ・高吸引圧での使用は、故障の原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

有効期間

1 年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

TEL : 049-243-9939

www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）