


機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
胸腹呼吸センサ（70073000）
（体動センサ（70074000））
Invivo 呼吸センサ P シリーズ

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

本品は、センサ部、エアチューブ及びコネクタから構成される。

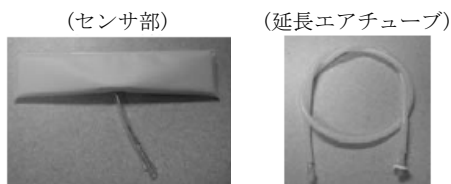

【保守・点検に係る事項】

本品を正しく使用するために、下記項目について使用前点検を行うこと。破損の兆候が見られる場合は、直ちに使用を中止すること。

1. 外観の確認
傷、穴、変形など破損がないこと。
2. 清浄性の確認
血液等汚れが付着しておらず清浄な状態であること。

なお、詳細については接続する装置の取扱説明書を参照すること。

2. 仕様

- (1) 寸法 センサ部：203 mm [幅] × 51 mm [奥行き]
延長エアチューブ：2 m [長さ]

(2) 製品タイプ

	製品番号	備考
**	0700-1004 (ED20)	センサ部
**	452213305361 (HP162)	延長エアチューブ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン
・お客様窓口

電話番号：0120-556-494 平日 9 時～18 時

3. 作動原理

患者に装着したセンサ部が腹部の活動により、収縮・膨張することで、センサ部内の空気圧が変動し、この空気圧の変動がエアチューブを通じて、処理装置に伝達される。

【使用目的又は効果】

本品は、腹部の活動を検出するために用いるセンサである。

【使用方法等】

1. 使用する処理装置の取扱方法に従い、センサ部を患者の腹部に装着する。
2. センサ部のエアチューブに延長エアチューブを接続する。
3. 処理装置に延長エアチューブを接続する。
4. 処理装置にて、測定を開始する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的な注意＞

1. センサ部に無理な圧力を加えないこと。
2. エアチューブを折り曲げないこと。
3. 本品は被服の上に装着し、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

5年 [自己認証（当社データ）による]
ただし、使用状況により差異が生じることがある。