

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
再使用可能なパルスオキシメータプローブ（37808000）
クイック・コネクト SpO₂ MRI センサ

再使用禁止（センサホルダ：クランク型、ストレート型）

【禁忌・禁止】

再使用禁止

1. センサホルダのうちクランク型、ストレート型は一回限り使用の単回使用品であるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

(1) パルスオキシメータプローブ




(2) センサホルダ

クリップ型

クランク型
（単回使用）

ストレート型
（単回使用）

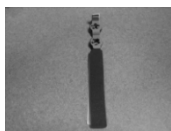

2. 仕様

(1) 製品タイプ

1) パルスオキシメータプローブ

製品番号	備考
989803161991	全長：570 [mm]

2) センサホルダ

製品番号	用途	備考
989803166531	成人用	クリップ型
989803166541	小児用	
989803166551	成人用	クランク型
989803166561	小児用	
989803166571	幼児用	
989803166581	新生児用	ストレート型
989803167111	成人／小児 幼児／新生児	スターターキット

3) 体に接触する部分の材料

- ① クリップ型：シリコーン
- ② クランク型：ポリエーテルウレタン
- ③ ストレート型：ポリエーテルウレタン

3. 作動原理

センサの発光部から赤外光および赤色光を放出する。血液と組織を透過した光は、センサの光検出器によって電気信号に変換され、ケーブルを介し測定機器へ送信される。

【使用目的又は効果】

本品は、成人、小児、新生児又は幼児患者の手指、足等の部分に使用し、皮膚を通して光を照射し、動脈組織血中のオキシヘモグロビン及びデオキシヘモグロビンによって吸収される光量を検知する際に用いられる。併用する測定機器で信号が受信され、結果が表示される。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. パルスオキシメータプローブのセンサ部にセンサホルダを装着する。
2. センサホルダを患者に装着する。なお、クランク型及びストレート型を使用する場合は、剥離紙を剥してから患者に装着する。
3. 併用する測定機器の取扱方法に従い、コネクタ部を測定機器へ接続する。
4. 測定を開始する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. プローブは光ファイバガラス製である。そのためプローブのどの部分も半径 15 mm 未満に曲げないこと。
2. 本品を、動脈カテーテル、静脈注入ラインまたは加圧式血圧カフが装着された四肢に装着しないこと。[不正確な値や間違ったアラームが鳴る可能性]
3. 本品を同一箇所に長時間装着すると皮膚の炎症の原因となる。本品の装着部位を定期的にチェックして、少なくとも 4 時間ごとに装着部位を変えること。
4. 外部の光源からの光が SpO₂ センサに入らないように、常に遮蔽すること。

【保守・点検に係る事項】

本品を正しく使用するために、下記項目について使用前点検を行うこと。破損の兆候が見られる場合は、直ちに使用を中止すること。

1. 外観の確認
傷、穴、変形など破損がないこと。
2. 清浄性の確認
血液等汚れが付着しておらず清浄な状態であること。

なお、詳細については取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時