


サイドストリームネブライザ

【形状・構造及び原理等】

＜形状、各部の名称＞

・サイドストリーム

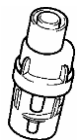

リユーザブル



ディスポーザブル

・マウスピース



リユーザブル



ディスポーザブル

・システムマスク




成人用




小児用

・エアチューブ

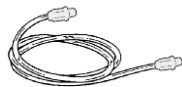


リユーザブル

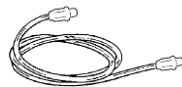

ディスポーザブル

＜作動原理＞

外部コンプレッサー等から送られるからの空気または酸素は、エアチューブを通してネブライザの底部から薬液コンテナ内のバップルへ送られる。空気又は酸素の圧力で薬液がベンチュリー効果により吸い上げられネブライザ内部のバップルに衝突しジェットホールを通してエアロゾル化し噴霧される。

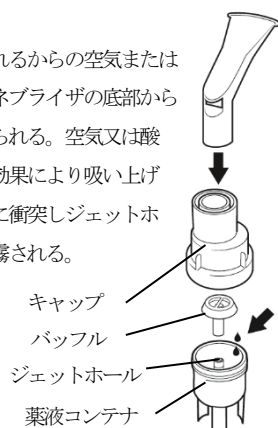

【使用目的又は効果】

本品は、医師が処方した吸入用薬剤を噴霧化し、マウスピースまたはマスクにより患者に投与するために使用する。

【使用方法等】

1. 準備

- ・エアチューブの片端を外部コンプレッサー等の空気または酸素流出口に接続する。
- ・エアチューブのもう一方の端を薬液コンテナの下部に付ける。
- ・薬液コンテナからキャップを回して取り外す。
- ・処方された吸入用薬剤を薬液コンテナに注ぐ。
- ・薬液コンテナのキャップを回して取り付け、マウスピースまたはマスクを接続する。

2. 使用

- ・外部コンプレッサー等を作動させる。（流量調節 6-8 L/min）
- ・霧がマウスピース/マスクから見えてくることを確認し、患者に投与を行う。
- ・サイドストリームの噴霧が漸時的になるか飛沫が始まったときを目安に、終了する。通常は少量の薬液が薬液コンテナの中に残る。

3. 使用後

- ・本品を分解し、全ての部品（エアチューブを除く）を洗う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・薬液がこぼれ出ることがあるため、サイドストリームを横に傾けない。
- ・ジェットホール部分は、薬液コンテナに固定されているため、取り外そうとしない。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品は、一人の患者専用で使用する。〔複数患者使用を意図して設計されていない。〕

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

- ・リユーザブル品：1日4回の治療で1年間
- ・ディスポーザブル品：1日4回の治療で30日間

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

洗浄方法

- ・毎使用後（リユーザブル及びディスポーザブル）

- (1) エアチューブからサイドストリームを外す。薬液コンテナからキャップを回して外し、各部品を水道水で洗い流す。薬液カップに水道水を注ぎ入れ、薬液コンテナとキャップを組み立て直し、エアチューブを再接続する。ジェットホールに残った薬液を洗うため、もう一度サイドストリームを数秒間作動させる。

- (2) サイドストリームを分解し、すべての部品(エアチューブを除く)を中性洗剤を溶かした温水の中で洗い、水道水で2分間以上すすぐ。余分な水を振り落として、自然乾燥させる。タオルで拭き取って乾すことはしない。
- (3) 各部品を組み立て直して、清潔な場所で保管する。

・週に1回 (リニューザブルのみ)

- (1) サイドストリームを分解し、2-3 滴の食器用液体洗剤を入れ沸騰させた水道水で部品(エアチューブを除く)を10分間煮沸し、水道水で2分間以上すすぐ。余分な水を振り落とし、自然乾燥させる。
- (2) 部品を組み立て直し、清潔な場所で保管する。

注意：

- ・本品の洗浄において、製品にダメージを与えるため、洗浄ブラシや先が鋭い物をジェットホールやバップルに使用しない。
- ・ジェットホールの詰まりや不適切な組み立ては、薬液の適切な投与を妨げる可能性がある。
- ・デイスポーザブル品は煮沸処理および再使用しない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

<緊急連絡先>

1. 平日 9:00～17:30

* 地域支店・営業所

※地域支店・営業所の連絡先は検索サイトより 「フィリップス スリープ&レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索ください。

2. 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

* 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

(フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー)
アメリカ合衆国