

フロー鼻／鼻口カニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、鼻または鼻及び口のフロー等を検出するために用いるセンサである。既承認・認証・届出の睡眠評価装置、呼吸センサ、睡眠評価用センサ等に接続される。

2. 構成

- A. フロー鼻カニューレ
- B. フロー鼻口カニューレ


3. 形状

- A. フロー鼻カニューレ

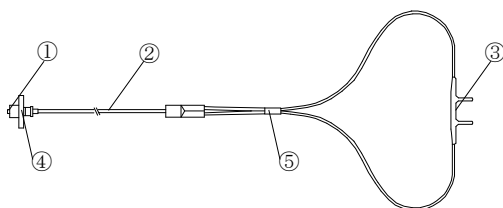

全長： 500~3,000 [mm]

- B. フロー鼻口カニューレ

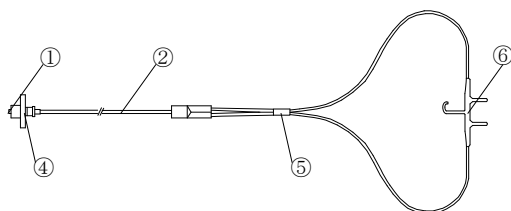

全長： 500~3,000 [mm]

- ① コネクタ ② チューブ ③ 鼻腔管
- ④ フィルタ ⑤ スライディングシンチチューブ
- ⑥ 鼻口腔管

※本品はポリ塩化ビニルを原材料に使用し、可塑剤として DEHP（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

4. 作動原理

患者に装着した鼻腔管または鼻口腔管からの気流を、チューブを介し接続先の睡眠評価装置、呼吸センサ、睡眠評価用センサ等へ送る。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻または鼻及び口のフローや圧力、いびきを検出するために用いるセンサである。

【使用方法等】

1. カニューレを鼻腔部または鼻腔部及び口腔部に装着する。
2. スライディングシンチチューブを用いて、長さを調節する。
3. 必要に応じて、鼻・鼻口腔管の先端を切断する。
4. 必要に応じて、医療用テープ等でカニューレを固定する。
5. コネクタを睡眠評価装置※、呼吸センサ、睡眠評価用センサ等に接続する。

- A. フロー鼻カニューレ B. フロー鼻口カニューレ



※本品と接続可能な自社の睡眠評価装置は以下のとおり。

販売名	承認番号又は認証番号
アリス 5	21700BZY00501000
アリス PDx	22100BZX01027000
アリス 6	301AFBZX00023000
アリス NightOne	228AABZX00030000

*

製造販売業者又は選任製造販売業者：自社

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・カニューレの位置・装着状態及び患者の皮膚状態・血液循環に異常がないことを定期的に確認する。
- ・皮膚の発赤やかぶれなどの過敏症状が現れた場合は、装着位置を変えるか、使用を中止する。
- ・鼻孔、口に近づけすぎて肌・粘膜を傷つけたり不快感を与えたりしないように、カニューレの装着位置には注意する。

【使用上の注意】

＜妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用＞

- ・小児及び妊娠中又は授乳中の患者への使用に際し、医師は、本品の使用による影響について説明する。[本品は健康被害を起こす可能性のある化学物質（フタル酸エステル類）を含有する。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

＜緊急連絡先＞

- 1. 平日 9:00～17:30

* 地域支店

※地域の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリープ&レス
ピラトリケア事業部 事業所一覧」でご検索下さい。

2. 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

* 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

(フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー)

アメリカ合衆国