


サイドストリームプラス ネブライザ

【形状・構造及び原理等】

<形状、各部の名称>


1) サイドストリームプラス ネブライザ

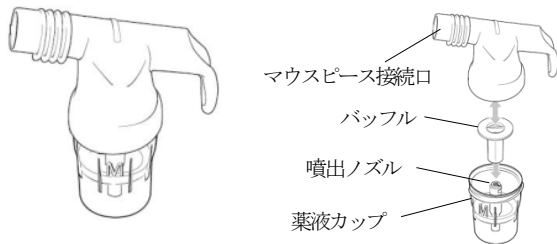


2) マウスピース




3) チューブ

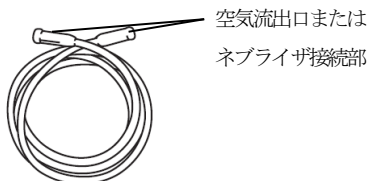

4) マスク（小児用・成人用）

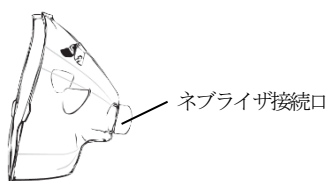

5) 小児用シール付マスク

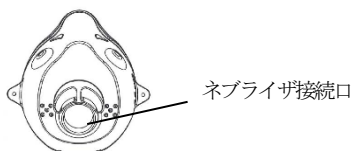

<作動原理>

外部コンプレッサー等から送られる空気または酸素は、チューブを通してネブライザ底部の薬液カップ内の噴出ノズルへ送られる。空気または酸素の圧力で薬液カップ内の薬液等がベンチュリー効果により吸い上げられ、空気または酸素と共にバッフルに衝突しジェットホールを通してエアロゾル化し噴霧される。

【使用目的又は効果】

本品は、医師が処方した吸入用薬剤を噴霧化し、マウスピースまたはマスクにより患者に投与するために使用する。

【使用方法等】

1. 準備

- (1) チューブの一端を外部コンプレッサー等の空気または酸素流出口に接続する。
- (2) チューブのもう一方の端を薬液カップの下部に接続する。
- (3) 薬液カップから上部を回して取り外し、処方された薬液等を薬液カップに注ぐ。
- (4) 薬液カップの上部を回して取り付け、マウスピースまたはマスクを接続する。

2. 使用

- (1) 外部コンプレッサー等のスイッチを入れる。（流量調節 3.5～8 lpm）
- (2) マウスピースまたはマスクから霧が出ていることを確認する。
- (3) マウスピースを歯で噛むようにくわえ、唇を閉じ、口でゆっくりと呼吸するか、マスクを鼻と口の上にあて、口でゆっくりと呼吸する。
- (4) ネブライザが継続的に作動したり、止まりかけるような音を立て始めたら、治療は完了。

3. 使用後

- ・本品を分解し、全ての部品（チューブを除く）を洗う。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・噴出ノズルの詰まりや不適切な組み立ては、薬液の正しい投与を妨げる原因となることがある。
- ・噴霧出力量（ml/分）は、患者の吸入方法（吸入流量）によって異なる。
- ・噴出ノズルは、薬液カップに固定されているため、取り外さない。
- ・ネブライザ破損の原因となるため、洗浄用ブラシを使用しない。また、噴出ノズルの穴に尖ったものを差し込まない。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は、一人の患者専用で使用する。[複数患者使用を意図して設計されていない。]

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間：6ヶ月

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

洗浄方法

- ・初めて使用する前、および毎使用後

- 1) ネブライザをチューブから取り外す。薬液カップから上部を回して取り外し、薬液カップと上部を水道水ですすぎ、薬液カップに水道水を充

填する。再び上部を薬液カップに取り付け、チューブを接続してから、
ネブライザを数秒間作動させ、ネブライザの噴出ノズルの中に残って
いる薬液等を洗い流す。

- 2) ネブライザを分解し、薬液カップからチューブを取り外し、すべての
部品（チューブ以外）を、中性洗剤を入れたお湯で洗浄する。
- 3) すべての部品を水道水ですすぎ、余分な水気を切り、自然乾燥させる。
タオル等では拭かない。
- 4) ネブライザを再び組み立て、使用しない時は清潔な場所に保管する。

・週に1回

ネブライザを分解し、すべての部品（チューブ以外）を、食器用液体洗剤
を2〜3滴入れた水を使って10分間煮沸し、水道水で最低2分間すすぎ、
余分な水を切って自然乾燥させる。その後組み立て、清潔な場所に保管す
る。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

<緊急連絡先>

1. 平日 9:00～17:30

* 地域支店・営業所

※地域支店・営業所の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリ
ープ&レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索ください。

2. 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

* 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICAN LLC

(フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー)

アメリカ合衆国