

機械器具 (76) 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000


イノスパイアミニ コンプレッサーネブライザ

【形状・構造及び原理等】


1. 形状及び各部の名称

・イノスパイアミニ コンプレッサー

ネブライザホルダー
(ネブライザを固定する)

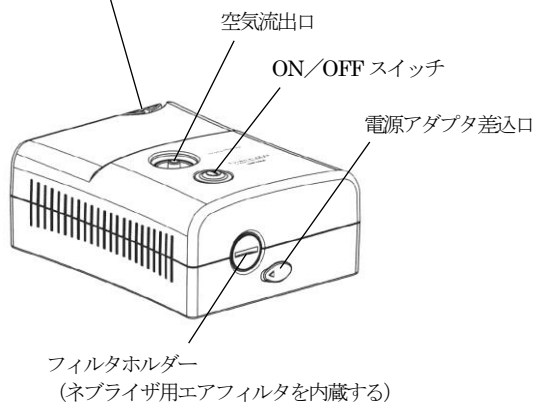


・サイドストリームプラス リューザブルネブライザ

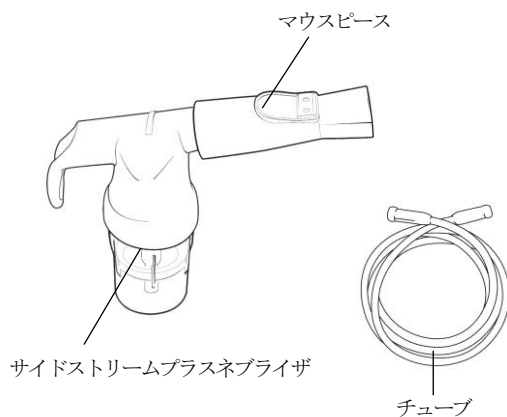


・ネブライザ用エアフィルタ




・サイドストリームプラス マスク (小児用・成人用)

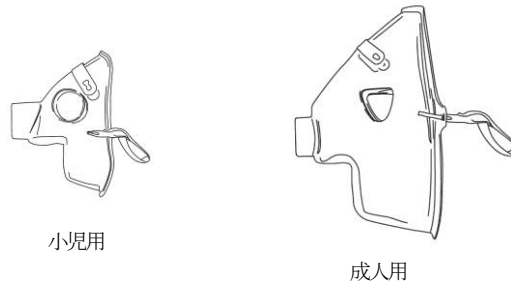


・サミザシール マスク (小児用)

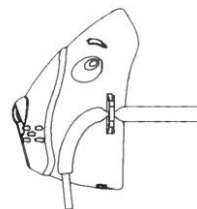


・ミニ用 AC 電源アダプタ

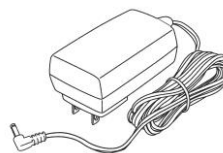

・ミニ用 12VDC アダプタ (自動車用)

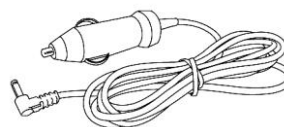

・ミニ用充電式バッテリー

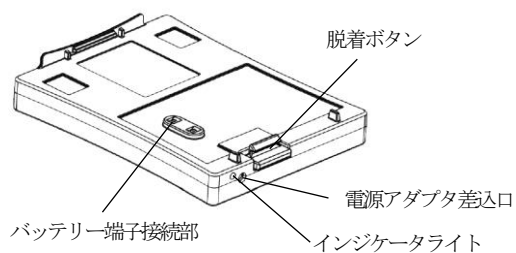

2. 作動原理

コンプレッサー等から送られる圧縮空気または酸素は、チューブを通してネブライザ底部の薬液カップ内の噴出ノズルへ送られる。圧縮空気または酸素の圧力で薬液カップ内の薬液等がベンチュリー効果により吸い上げられ、圧縮空気または酸素と共にバッフルに衝突しジェットホールを通してエアロゾル化し噴霧される。

【使用目的又は効果】

本品は、コンプレッサー及びジェット式ネブライザにより、呼吸療法用の医薬品をエアロゾル粒子化し、小児又は成人の患者に吸入させる装置である。

【使用方法等】

1. 準備

- (1) サイドストリームプラス リューザブルネブライザ及びイノスパイアミニ コンプレッサーに破損がないかを確認する。
- (2) ミニ用 AC 電源アダプタを使用する場合には、ミニ用 AC 電源アダプタをコンプレッサーの電源差込口に接続し、他端をコンセントに差し込む。
- (3) ミニ用充電式バッテリーを使用する場合には、ミニ用 AC 電源アダプタをミニ用充電式バッテリーの電源差込口に接続し、他端をコンセントに差し込む。又はミニ用 12VDC アダプタ(自動車用)をミニ用充電式バッテリーの電源アダプタ差込口に接続し、他端を自動車の 12VDC ソケットに差し込む。充電完了時はインジケータライトが緑色に点灯するので、ミニ用 AC 電源アダプタ又はミニ用 12VDC アダプタ(自動車用)を取り外し、ミニ用充電式バッテリーにイノスパイアミニ コンプレッサーを装着する。
- (4) 使用にあたっては手を清潔な状態にしておく。
- (5) サイドストリームプラスネブライザのトップを開け、薬液カップに処方薬を充填する。
- (6) チューブの一端をサイドストリームプラスネブライザの下部に接続し、他端をイノスパイアミニ コンプレッサーの空気流出口に接続する。

2. 使用

- (1) ON/OFF スイッチで電源を ON にして、治療を開始する。
- (2) マウスピース又はマスクからエアロゾルを吸引する。

3. 使用後

- (1) ON/OFF スイッチで電源を OFF にする。
- (2) ミニ用 AC 電源アダプタ又はミニ用 12VDC アダプタ(自動車用)を取り外す。ミニ用充電式バッテリーを使用した場合は、ミニ用充電式バッテリーを取り外す。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・本品は、30 分間オンの後、30分間オフを行う不連続的な使用を想定し、設計されている。適切に操作しないと、装置が破損する原因となる。
- ・ネブライザを使用できない(停電時、またはコンプレッサーやバッテリーが何らかの理由で作動しないなど) 非常時のために、予備として吸入装置 (MDI (定量吸入器) など) を用意しておく。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

- イノスパイアミニ コンプレッサー：
3 年 [自己認証 (当社データ) による]
ミニ用充電式バッテリー：
6 ヶ月間 [自己認証 (当社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

洗浄

- ・湿らせた布を使い、必要に応じてイノスパイアミニ コンプレッサーの外面を拭き取る。研磨剤は使用しない。
- ・定期的にネブライザ用エアフィルタをチェックし、汚れている場合は交換する。
- ・サイドストリームプラス リューザブルネブライザは使用毎又は週に 1 回洗浄を行う。(一人患者用)
- ・サイドストリームプラス マスク (小児用・成人用) 及びサミザシール マスク (小児用) は使用毎にすすぐ。また、1 日に 1 回洗剤を入れた温水に 5 分間浸し、よくすすいでから自然乾燥させる。(一人患者用)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

<緊急連絡先>

1. 平日 9:00～17:30

* 地域支店・営業所

※地域支店・営業所の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリープ&レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索下さい。

2. 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

電話番号：0120-633881

* 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

(フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー)
アメリカ合衆国