


機械器具（06）呼吸補助器
管理医療機器 再使用可能な人工呼吸器呼吸回路 37705000

パフォーマンスチューブ （パフォーマンスチューブ 15mm×180cm）

【形状、構造及び原理等】

・形状

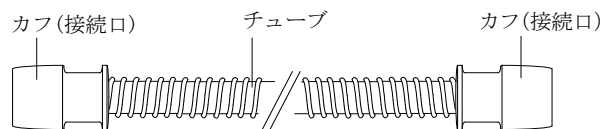

・寸法

全長：1,830 mm、カフ内径：22mm、チューブ内径：15mm

・動作原理

主に人工呼吸器又はマスクの呼吸システム間で空気又は酸素を含むガスを送入する。一方、本品は加温加湿器に接続可能である。

・適用機種

本品が接続可能な機種は以下のとおり。

販売名	承認番号
レムスターAuto PRI システム	22200BZX00874000
レムスター PRI システム	22200BZX00875000
BiPAP エーバップス	22300BZX00382000
BiPAP Auto System One シリーズ	22400BZX00003000
BiPAP autoSV Advanced System One シリーズ	22500BZX00024000
BiPAP A40 システム	22500BZX00130000
REMstar Auto System One 60 シリーズ	22500BZX00268000
BiPAP Auto System One 60 シリーズ	22500BZX00448000
REMstar Pro System One 60 シリーズ	22500BZX00477000
BiPAP autoSV Advanced System One 60 シリーズ	22600BZX00073000
BiPAP A40 システム シルバーシリーズ	22600BZX00347000
OmniLab システム	22600BZX00391000

【使用目的又は効果】

本品は、人工呼吸器（CPAP 装置、BiPAP 装置含む）から患者への空気又は酸素を含むガスの送入に用いる呼吸回路である。

【使用方法等】

1. カフを人工呼吸器へ接続する。
2. 逆側のカフをマスク等へ接続する。
3. 人工呼吸器を操作し、マスクを介し患者へ空気又は酸素を含むガスを送入する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・呼吸回路を引っ張ったり、変形させたり、負荷を加えない。
[呼吸回路の破損やリークを起こす原因となる]

【使用上の注意】

- ・本品は一人の患者のみに使用する。[本品は滅菌できない]

【保守・点検に係る事項】

- ・初回の使用前及び毎使用後に、温水に中性洗剤を溶かした溶液の中で洗浄し、十分にすすいだ後、自然乾燥させる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * 選任製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

** ＜緊急連絡先＞

1. 平日 9:00～17:30

地域支店

※地域支店の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリープ & レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索下さい。

2. 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

- ** 外国特例認証取得者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

フィリップス アールエス ノース アメリカ
エルエルシー
アメリカ合衆国

- ** 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエル
シー
アメリカ合衆国