

機械器具（21）内臓機能検査用器具
管理医療機器
多項目モニタ（33586002）
（マルチガスモニタ（70085000））

「Expression MRI 対応生体情報モニタ」の構成品 サンプリングライン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


1. 本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1 構成

- (1) エアウェイアダプタ
- (2) サンプルチューブ

2 外観

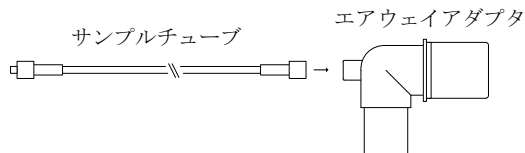

3. 仕様

(1) 製品タイプ

1) エアウェイアダプタ

製品番号	品名	備考
989803152691 (9025)	エアウェイアダプタ	50個

2) サンプルチューブ

製品番号	品名	備考
989803152541 (94021)	サンプルチューブ（青）	1個
989803152661 (94018)	サンプルチューブ（透明）	1個

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. サンプリングラインは、エアウェイアダプタを呼吸回路に挿入する前に、必ずウォータートラップに接続すること。取り外す場合は、必ずエアウェイアダプタを呼吸回路から外した後、本体から取り外すこと。
2. 使用しないときは、エアウェイアダプタ、サンプルチューブ等をウォータートラップから取り外すこと。
3. 本品の接続は確実にすること。〔漏れがあると、患者のサンプルガスが周囲の空気と混じって誤った測定結果を招く原因となる〕

詳細は、生体情報モニタ本体の取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

常温、常湿、直射日光の当たらない場所で保管。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン
・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時

** 製造業者：フィリップス ディーエス ノースアメリカ エルシー
ルシー

(Philips DS North America LLC)

国 名：アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

生体情報（体温、呼吸数、心電図、観血血圧、非観血血圧、動脈血酸素飽和度）を収集、監視及び提供する。

また、患者の呼気及び吸気の二酸化炭素濃度、酸素濃度、揮発性麻酔ガス濃度、亜酸化窒素ガス濃度を測定及び提供する。

【使用方法等】

1. ウォータートラップにサンプルチューブを接続する。
2. サンプルチューブにエアウェイアダプタを接続する。
3. 患者に装着されている呼吸回路にエアウェイアダプタを接続する。
4. 接続先機器の取扱説明書に従い、測定を開始する。

取扱説明書を、必ず確認してください。