

** 2026 年 10 月（第 8 版）
* 2025 年 3 月（第 7 版）

医療機器認証番号：226ADBZX00172000

機械器具（51）医療用鼻管及び体液誘導管
管理医療機器
酸素供給二酸化炭素収集経鼻カテーテル（36306000）
Invivo 鼻カニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。


【使用目的又は効果】

外鼻孔経由で酸素を供給するとともに呼気から二酸化炭素を収集するために用いる。また、二酸化炭素の収集のみに用いるものもある。


【形状・構造及び原理等】

1. 外観

A. 酸素供給/二酸化炭素収集用カニューレ

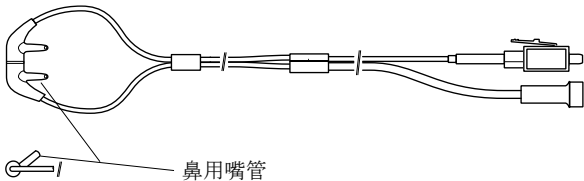

B. 二酸化炭素収集用カニューレ

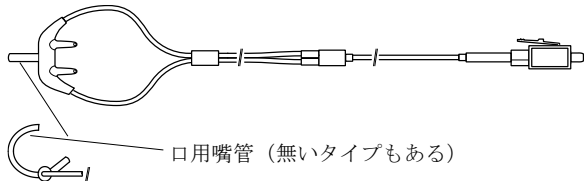

2. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	用途	備考
989803183241	二酸化炭素収集用 成人用（口用鼻管付き）	20 本
989803183251	二酸化炭素収集用 小児用（口用鼻管付き）	20 本
989803183261	二酸化炭素収集用 新生児用（口用鼻管無し）	20 本
989803183271	酸素供給/二酸化炭素収集用 成人用	20 本
989803183281	酸素供給/二酸化炭素収集用 小児用	20 本

** (2) 原材料

粘膜に接触する部分：ポリ塩化ビニル（DEHP 不使用）

3. 作動原理

酸素供給機器から酸素供給用チューブを介して患者へ酸素を送り、患者の呼気を鼻管にて回収し、呼気用チューブを介して二酸化炭素濃度測定機器に送る。
また、呼気用チューブを介して二酸化炭素濃度測定機器に送るのみの場合がある。

【使用方法等】

1. 鼻管を患者の適切な部位に位置させ、チューブを患者の耳にかけた後、チューブが外れないようにスリーブで長さを調節する。
2. 酸素供給機器の使用 방법에従い、当該機器に本品の酸素供給用コネクタを接続し、酸素供給を行う。及び/又は、呼気用チューブのコネクタを二酸化炭素濃度測定機器に接続し、当該機器の使用 방법에従い、二酸化炭素測定を行う。
3. 本品を患者から取り外す際には、スリーブを緩めてから取り外す。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前に包装、製品に亀裂、破損等の異常がないことを確認し、異常が認められた場合には使用しないこと。
2. 火気のある場所で使用しないこと。
3. 本品をねじったり、曲げたりしないこと。
4. クリーニングや消毒はしないこと。

使用上の注意の詳細については、本品を接続する医療機器等の取扱説明書も参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時

製造業者：サルター ラブス（Salter Labs）

国 名：アメリカ合衆国

取扱説明書を、必ず確認してください。