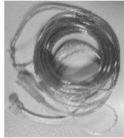
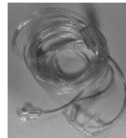
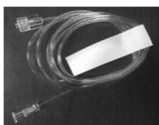


機械器具（12）理学診療用器具
 高度管理医療機器
 手動式除細動器（37806000）
 （半自動除細動器（37805000））
 （一時的使用ペースング機能付除細動器（17882000））
 （重要パラメータ付き多項目モニタ（33586003））
「ハートスタート Intrepid」の付属品
 CO₂ 鼻腔装着用チューブ

再使用禁止**【禁忌・禁止】****使用方法**

- ・本品は一回限り使用のディスポーザブル製品であるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**1. 外観****(1) 鼻腔装着用チューブ****a. 酸素供給用コネクタ付き****b. 酸素供給用コネクタなし****(2) エアウェイアダプタ****(3) 延長チューブ****a. 二酸化炭素サンプリング用****延長チューブ****b. 酸素供給用延長チューブ****2. 仕様****(1) 製品タイプ**

製品番号	説明	外観	備考
989803198891	CapnoTrak CO ₂ 鼻用 カニユーレ成人用	(1) b	25/袋
989803198901	CapnoTrak CO ₂ 鼻用 カニユーレ小児用	(1) b	25/袋
989803198911	CapnoTrak CO ₂ 鼻用 カニユーレ乳児用	(1) b	25/袋
989803198921	CapnoTrak CO ₂ /O ₂ 鼻用 カニユーレ成人用	(1) a	25/袋
989803198931	CapnoTrak CO ₂ /O ₂ 鼻用 カニユーレ小児用	(1) a	25/袋
989803198941	CapnoTrak CO ₂ /O ₂ 鼻用 カニユーレ乳児用	(1) a	25/袋
989803198951	CapnoTrak CO ₂ 口/鼻用 カニユーレ成人用	(1) b	25/袋
989803198961	CapnoTrak CO ₂ 口/鼻用 カニユーレ小児用	(1) b	25/袋
989803198971	CapnoTrak CO ₂ /O ₂ 口/鼻用 カニユーレ成人用	(1) a	25/袋
989803198981	CapnoTrak CO ₂ /O ₂ 口/鼻用 カニユーレ小児用	(1) a	25/袋
989803198991	CapnoTrak エアウェイア ダプタセット ET>4.0mm	(2)	25/袋
989803199001	CapnoTrak エアウェイア ダプタセット ET≤4.0mm	(2)	25/袋
989803199021	CapnoTrak CO ₂ サンプル 延長チューブ	(3) a	25/袋
989803199031	CapnoTrak O ₂ 供給延長 チューブ 1.5m	(3) b	25/袋

【使用目的又は効果】

本品は、体外又は体内の電極を介して電気パルスショックを供給することによって心臓の除細動を行うことを目的として使用する。
 また、生体情報モニタとしての機能も備える。

【使用方法等】

1. 患者タイプ、患者の気道の状態等に基づき、適切なアクセサリを選択する。
2. 鼻腔装着用チューブを使用する場合、両方の鼻腔が詰まっていないことを確認してから、カニューレを患者に装着する。
3. エアウェイアダプタを使用する場合、チューブに力が加わらないように装着すること。
4. 本体をモニタリングのみに使用する場合、除細動ノブで「モニタ」を選択する。
5. 必要に応じて、二酸化炭素濃度、呼吸数及び無呼吸時間の警報値を設定する。

【使用上の注意】

1. エアロゾル剤または麻酔ガスのある場所では、CO₂ の測定値が不正確になるおそれがある。
2. 無呼吸（特に幼児の無呼吸）の検出における呼吸数測定法の安全性と有効性はまだ確立されていない。
3. CO₂ センサのゼロ校正が必要な場合、センサが正しい大気圧に対して設定されていない場合、またはセンサのウォームアップ時間が十分ではなかった場合は、EtCO₂ および AwRR の測定値が不正確になるおそれがある。
4. 空気、酸素、または亜酸化窒素と混合した可燃性麻酔薬のある場所では使用しないこと。[爆発の危険性]
5. サンプルラインは、レーザー、ESU 装置、または高温に直接さらしたときに酸素が存在する環境で使用しないこと。[発火のおそれ]

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・ AED コールセンター

電 話：0120-802-337 平日 9 時～18 時

・ 修理受付窓口

電 話：0120-381-557

製造業者：フィリップス ゴールドウェイ（シェンチェン）

インダストリアル インク

(Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.)

国 名：中華人民共和国