

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びブリード 35562010

マグネリードCMー

【警告】

<適用対象(患者)>

異常が発見された場合は、ただちに患者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じてください。

<使用方法>


医師または医師の指示を受けた者以外は、本製品を使用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・ケーブルを患者の首に巻きつけるように配置しないでください。[ケーブルが首に巻きつき、被検者の生命及び健康に影響を与える恐れがあります。]
- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

*構成品と種類

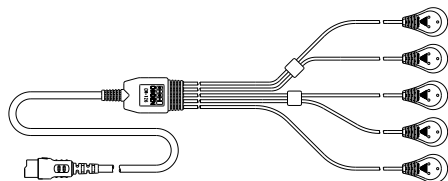

(図は CM-126)

*種類

No.	型式	備考
1	CM-126	FM-500、FM-700 用、双極 2ch
2	CM-127	FM-120 用、双極 2ch
3	CM-128	FM-120 用、双極 2ch
4	CM-128L	FM-120 用、双極 2ch、L 型コネクタ
5	CM-129	FM-700 用、12 誘導
6	**CM-33 (AKA)	φ 3 ジャック
7	**CM-33 (KIIRO)	φ 3 ジャック
8	**CM-33 (MIDORI)	φ 3 ジャック
9	**CM-33 (KURO)	φ 3 ジャック
10	**CM-33 (SHIRO)	φ 3 ジャック
11	**CM-33 (TYAIRO)	φ 3 ジャック
12	**CM-33 (MURASAKI)	φ 3 ジャック
13	**CM-33 (MIZUIRO)	φ 3 ジャック
14	**CM-33 (DAIDAI)	φ 3 ジャック
**15	CM-33 (AO)	φ 3 ジャック

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

1. 被検者にディスプレイ電極マグネロードを取り付けた後、本製品を電極に接続する。
2. 本製品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本製品を電極や機器本体からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持って引き抜いてください。[断線のおそれがあります。]
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。[重大な事故の原因となることがあります。]
- ・ケーブルを強くねじらないでください。ケーブルを巻いて束ねた状態から強く引っ張るとねじれの原因となります。[断線や破損のおそれがあります。]
- ・ケーブルの上にものを置いたり、踏まれたりしないようにしてください。[断線や破損のおそれがあります。]
- ・本製品の先端部には磁石が使用されております。本製品を植込み型ペースメーカや植込み型除細動器 (ICD) を装着した方へ使用する場合、本製品の磁石部が植込み型ペースメーカや植込み型除細動器 (ICD) の植込み部位の上若しくは近くに直接位置しないようにしてください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

使用温度: 10~40℃

使用湿度: 30~85%

耐用期間

2 年 [自己認証 (当社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

- ・本製品使用後は、中性洗剤または 70% イソプロピルアルコールで清拭してください。コネクタ等からケーブルを引っ張るように清拭しないでください。(ケーブルを清掃する際はコネクタ部を持たずにケーブル部を握って清掃願います) [ケーブル被覆の劣化を促進し、破損の恐れがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はケーブル被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先 (販売業者)

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷 3-39-4

電話番号: 03-3815-2121 (代)