

機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ JMDN コード: 35457000

スパイラル D D S

再使用禁止

【警告】

使用中は患者について閉塞を起こさないよう常に監視すること。

【禁忌・禁止】



再使用禁止

＜使用方法＞

1. 本品と患者の間に人工鼻あるいはフィルターは決して取りつけないこと。
2. 使用可能期間: 初回利用開始後 7 日までとすること。

【形状・構造及び原理等】

本品は、人工呼吸回路に取り付けて、エアロゾル化させた医薬品等を噴霧・吸引させるために使用するスパーサータイプのネブライザ容器である。

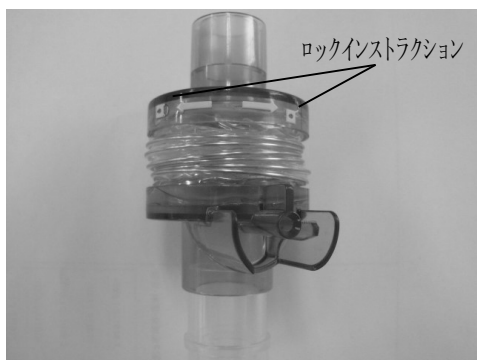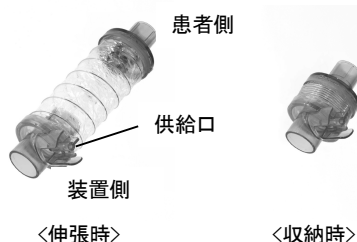

ロックインストラクション

本体にプリントしてある、ロックインストラクションの矢印の方向に回転させスリーブを伸縮させる。本体ポート部分にロックさせる為に切り込みがあり、ロックインストラクションがプリントされているポートを回転させると切り込み部分に反対側のポートが挟まる。挟まったらロック方向に回し、必ずロックされていることを確認すること。

なお、収納時本体容量は 30ml、伸長時は 148ml となる。



品番	品種	包装
AMDN1312	スパイラル DDS	10 個/箱

【使用目的又は効果】

本品は、エアロゾル化した医薬品等を供給・吸入するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、人工呼吸回路の患者側吸気回路と Yコネクタの間に取り付け。その際、取り付け方向に注意し、吸入器の供給側を上に向けること。
2. 折り畳まれたスリーブ部を伸延させ、噴霧吸入器を接続し噴霧を行う。
3. 薬液を噴霧しない場合は、スリーブ部を縮め収納しておくこと。

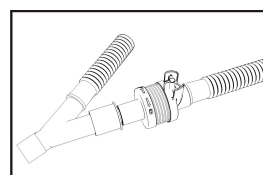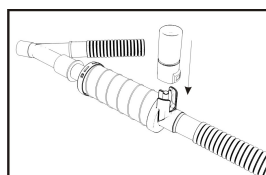

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 噴霧・吸引後、必ず収納ポジション（折りたたんだ状態）に戻し、回転させロックされた状態になっていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル

TEL: 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社 フジメディカル

*〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:

アームストロング・メディカル社

Armstrong Medical Limited

北アイルランド

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社 **フジメディカル**