

機械器具(12) 理学診療用器具
一般医療機器 体表面用超音波プローブカバー JMDN コード: 70014000
シバガイド

【禁忌・禁止】

1. 併用医療機器
本品に対応した適用プローブ以外の超音波画像診断装置用
プローブに使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

*〈ソノサイト用ニードルガイドブラケット〉 未滅菌品 (外観図)




品番	商品名	仕様
SVA-H3801	シバガイド HFL38-1 号 (17G, 20G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 17G, 20G
SVA-H3802	シバガイド HFL38-2 号 (17G, 21G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 17G, 21G
SVA-H3803	シバガイド HFL38-3 号 (18G, 20G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 20G
SVA-H3804	シバガイド HFL38-4 号 (18G, 21G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 21G
SVA-H3805	シバガイド HFL38-5 号 (18G, 22G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-H38S1V	シバガイド HFL38-S1V 号 (20G*)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針
SVA-H3801V	シバガイド HFL38-1V 号 (20G*)	高周波リニアプローブ HFL38 用 長軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針
SVA-H38S4V	シバガイド HFL38-S4V 号 (22G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル 22G
SVA-H3804V	シバガイド	高周波リニアプローブ

	HFL38-4V 号 (22G)	HFL38 用 長軸用 適用ニードル 22G
SVA-38S8V	シバガイド HFL38-S8V 号 (18G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル 18G
SVA-H3825	シバガイド HFL38-25 号 (25G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 25G
SVA-H38X02	シバガイド HFL38X-2 号 (17G, 22G)	高周波リニアプローブ HFL38x 用 適用ニードル 17G, 22G
SVA-H5001	シバガイド HFL50-1 号 (18G, 22G)	高周波リニアプローブ HFL50 用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-H5002	シバガイド シバガイド HFL50-2 号 (18G, 20G)	高周波リニアプローブ HFL50 用 適用ニードル 18G, 20G
SVA-C1101	シバガイド C11-1 号 (17G, 20G)	マイクロコンベックスプローブ C11 用 適用ニードル 17G, 20G
SVA-C35X01	シバガイド C35X-1 号 (17G, 20G)	マイクロコンベックスプローブ C35x 用 適用ニードル 17G, 20G
SVA-C6001	シバガイド C60-1 号 (17G, 21G)	コンベックスプローブ C60 用 適用ニードル 17G, 21G
SVA-C60X02	シバガイド C60X-2 号 (17G, 22G)	コンベックスプローブ C60x 用 適用ニードル 17G, 22G
SVA-NXL2501V	シバガイド NXL25-1V 号 (20G*)	リニアプローブ L25 用 長軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針
SVA-NXL25S1V	シバガイド NXL25-S1V 号 (20G*)	リニアプローブ L25 用 長軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針

原材料: ナイロン 12

〈GE 社用ニードルガイドブラケット〉 未滅菌品 (外観図)

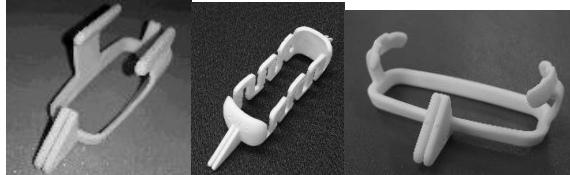

品番	商品名	仕様
SVA-GE12L01	シバガイド GE12L-1 号 (18G, 20G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 20G
SVA-GE12L02	シバガイド GE12L-2 号 (18G, 21G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 21G
SVA-GE12L03	シバガイド GE12L-3 号 (18G, 22G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-GE12L01V	シバガイド GE12L-1V 号 (20G*)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針
SVA-GE12LS1V	シバガイド GE12L-S1V 号 (20G*)	リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針
SVA-GE12L02V	シバガイド GE12L-2V 号 (20G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 20G
SVA-GE12LS2V	シバガイド GE12L-S2V 号 (20G)	リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル 20G
SVA-GE12LS8V	シバガイド GE12L-S8V 号 (18G)	リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル 18G
SVA-GEC1501	シバガイド GEC15-1 号 (18G, 20G)	コンベックスプローブ C1-5-RS 用/4C-RS 用 長軸用 適用ニードル 18G, 20G
SVA-GEC1502	シバガイド GEC15-2 号 (18G, 21G)	コンベックスプローブ C1-5-RS 用/4C-RS 用 長軸用 適用ニードル 18G, 21G

原材料：ナイロン 12

** 〈コニカミノルタ用ニードルガイドブラケット〉 未滅菌品

品番	商品名	仕様
SVA-KML11-3-1	シバガイド L11-3 号	超音波プローブ L11-3 用 適用ニードル 18G, 22G

	(18G, 22G)	
SVA-KML18-4-1	シバガイド L18-4 号 (18G, 22G)	超音波プローブ L18-4 用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-KMLMC10-3	シバガイド MC10-3 用 (17G, 22G)	超音波プローブ MC10-3 用 適用ニードル 17G, 22G

原材料：ナイロン 12

【使用目的又は効果】

本品は、超音波プローブに取り付け、穿刺針の刺入方向をガイドするために用いる。

【使用方法等】

- 1.使用前に本品に割れ目や破損等が無いことを確認すること。
- 2.使用する際は、消毒または滅菌すること。
- 3.超音波プローブにエコプローブカバーⅡ(別売)のスリーブを装着する。
- 4.超音波プローブの目印(キー)に合わせ、上下左右に注意して本品をスリーブを装着した超音波プローブにはめ込む。その際、プローブカバーが破れないよう注意しながら装着すること。
- 5.本品の左右のニードルガイド部分にゲージ数が刻印されているので、相当するゲージ数の穿刺針を使用すること。
- 6.ニードルガイド部分の溝に穿刺針を入れ、超音波画像を確認しながら、穿刺針を刺入する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 超音波画像診断装置等の使用法は、使用機器の添付文書及び取扱説明書を参照すること。
- 2) プローブに本品が正確な位置にしっかり固定されない場合は使用しないこと。(プローブカバーが破れる可能性があるため。)
- 3) 適切なゲージ数で目的部位に届く適切な長さのニードルを使用すること。
- 4) 穿刺時には、モニター画面上のガイドラインにて穿刺針先を確認すると共に、穿刺の際に見られる穿刺対象物の動きに注意して手技を行うこと。
- 5) 使用後は洗浄及び消毒・滅菌を行い清潔に保管すること。
高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)はニードルガイドの溝が変形する恐れがあるので行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

次の使用まで汚染等注意到意し清潔・乾燥が保てる場所に保管すること。

【使用期間】

滅菌して保管する場合、滅菌有効期限の管理をすること。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル

TEL:03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者(お問い合わせ先):

株式会社 フジメディカル

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル

TEL:03-3356-8377

製造元:

八十島プロシード株式会社 仙台工場

宮城県黒川郡富谷町上桜木 2 丁目 1-4

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社 **フジメディカル**