

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 JMDN コード: 35517000


バイトブロック

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

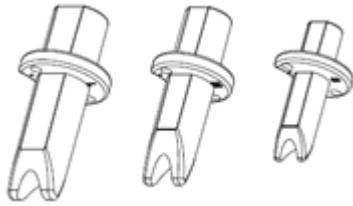

品番	サイズ	全長	咬み合い径
CD1001	L	69mm	15mm
CD1004	M	63mm	14mm
CD1002	S	50mm	11mm

2. 原材料

ポリ塩化ビニル（可塑剤：テレフタル酸ジオクチル）

3. 原理

筒の形状で、上下顎切歯間に挿入することで開口を維持する。
挿管チューブの咬み防止を行う。

【使用目的又は効果】

様々なサイズ、形状及び輪郭のものがある。挿入して開孔するときに開口部を拡張する。検査又は他の器具の挿入時に用いる。

【使用方法等】

- 使用前に、本品に異常がないことを確認する。
- 本品を汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
- 患者の上下臼歯部を大きく開く。
- 尖った方を上下顎切歯間に入れる。
- 先端の溝が体の縦軸方向になるように留意しながら、中央部の出っ張り部分が歯の外側になるように留意する。
- 本品がはずれたりしないようにテーピング等で固定する。
- 終了後、感染・汚染に注意しながら、本品を口から取り外し、安全に廃棄する。

【使用上の注意】

〈使用注意〉

- 本品装着後、意図した位置から脱落していないか、本品に損傷が起っていないかの確認を常にすること。配置した位置等に異常がある場合は使用を中止すること。[患者の呼吸を阻害する可能性がある。]
- 適切なサイズを選択すること。
- 患者の歯及び下顎の状態等に注意すること。歯がもろく、本品を咬むことにより損傷が生じる可能性がある場合は使用しないこと。
[本品を咬むことにより不具合を生じる可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

〈使用期間〉

- 製品の外箱の使用期限欄を参照すること

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フジメディカル
TEL: 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社 フジメディカル
〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:

パシフィックホスピタルサプライ社
Pacific Hospital Supply Co., LTD.
台湾

