

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 体表面用超音波プローブカバー JMDN コード: 70014000

体表面用プローブカバー

再使用禁止


【禁忌・禁止】
・再使用禁止。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。（自己認証（自社データ）による）

【形状・構造及び原理等】

本品は、プローブ先端及びケーブルを保護するプローブカバーとそれを束ねるゴムバンド、テープ、注入用のジェル及びドレープ紙からなる。本品は滅菌済み製品である。

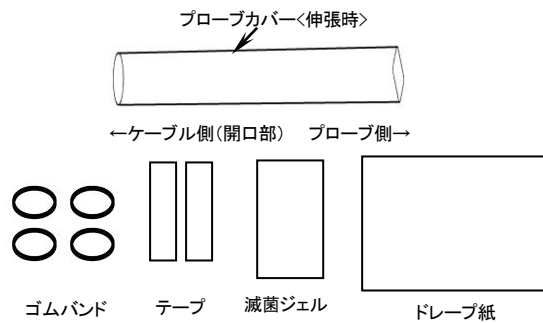

プローブカバー原材料: ポリウレタン (ポリエステル系)

品番	仕様
HY14122	全長 122cm、幅 14cm、先端幅 10.5cm X 3.5cm

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フジメディカル
TEL: 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
株式会社 フジメディカル
TEL: 03-3356-8377



外国製造業者:
ホニイメディカル社 (中華人民共和国)
Hony Medical Co., Ltd

【使用目的又は効果】

本品は、体表面を診断する画像診断装置等の超音波プローブにカバーとして装着し、プローブ本体を体液又は汚れ等から保護するために用いる。

【使用方法等】

- 滅菌バッグ及び内側のドレープ紙から本品を取り出す。
- 取り出したプローブカバーが折りたたまれた状態で内側に滅菌ジェルを適量注入する。
- プローブをプローブカバー内に装着する。
- ゴムバンド、もしくはテープで固定する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 使用前に破損等が無いことを確認して下さい。
- 超音波画像診断装置等の使用方法・使用上の注意に従って使用すること。
- 装着するプローブの大きさに適切なサイズを使用すること。
- プローブへの装着は付属のドレープ紙の上で行うこと。（ドレープ紙が付属されている場合）
- 本品は 1 回限り使用のため滅菌・再使用はしないこと。
- ゴムバンド（テープ）はしっかりと固定すること。
- 滅菌ジェルは適量使用すること。[使用量が少ないと画像が不鮮明になる場合がある]
- 滅菌ジェルの注入後、漏れが生じていないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。