

**2023 年 5 月改訂(第 11 版)
*2017 年 7 月改訂 (第 10 版)

器 06 呼吸補助器
管理医療機器 経鼻用酸素供給カニューレ JMDN：35203000
(酸素投与キット JMDN：12855000)


シルキーソフト 酸素カニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：非フタル酸可塑剤）を使用しています。

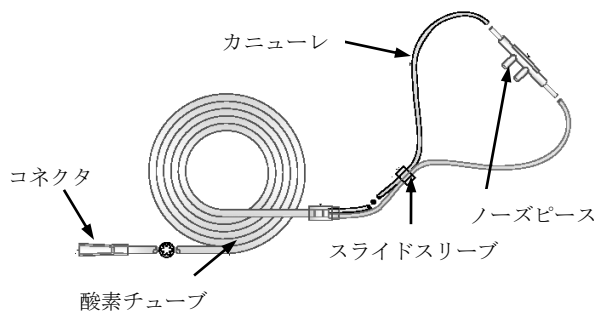

品 目	品 番	仕 様	包 装
シルキーソフト 酸素カニューレ 成人用	HT1012	2.1m 酸素チューブ (スタンダード)	50 個/箱
シルキーソフト 酸素カニューレ 成人用	HT1012F	2.1m 酸素チューブ (フレアーコネクタ)	50 個/箱
シルキーソフト 酸素カニューレ 小児用	HT1013	2.1m 酸素チューブ (スタンダード)	20 個/箱
シルキーソフト 酸素カニューレ 新生児用	HT1014	2.1m 酸素チューブ (スタンダード)	20 個/箱

酸素流量 (L) 濃度 (%) ... 2~4 / 25%・4~6 / 40%

本品には 2.1m のシユアフロ-02 チューブが付いていますが、
シユアフロ-02 チューブ単品として下記の品種があります。

品 目	品 番	仕 様	包 装
シユアフロ-02 チューブ	HT1115	2.1m 酸素チューブ (スタンダード)	50 個/箱
シユアフロ-02 チューブ	HT1115F	2.1m 酸素チューブ (フレアーコネクタ)	50 個/箱
シユアフロ-02 チューブ	HT1118	4.2m 酸素チューブ (スタンダード)	50 個/箱
シユアフロ-02 チューブ	HT1119	7.6m 酸素チューブ (スタンダード)	25 個/箱
シユアフロ-02 チューブ	HT1110	10.0m 酸素チューブ (スタンダード)	20 個/箱

【使用目的又は効果】

経鼻的に酸素ガスを投与するために用いる。

【使用方法等】

1. 酸素供給源に酸素チューブのコネクタを確実に接続し、医師の処方に基づいて、酸素流量を設定します。
2. ノーズピースを鼻孔に入れ、カニューレを両耳にかけて顎の下にまわしてください。
3. スライドスリーブで調節してカニューレを固定します。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. フレアーコネクタタイプについては、加湿瓶の接続部外径に合わせて、コネクタの先端を切断した上で接続してください。
2. 使用する前に漏れや閉塞がないことを確認してください。
3. 気管内チューブまたは気管切開チューブと接続して使用しないで下さい。また、他の製品と接続するときはその互換性・安全性を十分確認して下さい。(シユアフロ-02 チューブ)

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて
室温で保管してください。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照してください。[自己認証(自社データ)による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フジメディカル
TEL 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377

外国製造業者：

エヴィオン メディカル社
Avion Medical Sp. Z o.o
ポーランド

**FUJI MEDICAL
CORPORATION**

株式会社 **フジメディカル**