

器05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用二酸化炭素吸収器 JMDN：42414000

再使用禁止

アムソープ プラス CAN

【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

**1. 形状

ユニバーサル バブル CAN（カタログ番号：AMAB4001）



G-CAN（カタログ番号：AMAB3801-1）

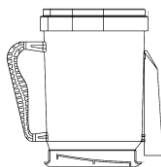

*カートリッジタイプ（カタログ番号：AMAB3201）



商品名	質量（容器容量）
ユニバーサル バブル CAN	930g (1.2 L)
G-CAN	800g (1.0 L)
*アムソーププラスカートリッジ	1,000g (1.2 L)

【使用目的又は効果】

本品は、二酸化炭素吸収剤のため、麻酔システムの呼吸回路に用いるプレバック容器である。呼気中の二酸化炭素の除去のため、呼吸回路に設置する。

本品は、二酸化炭素吸収剤が充填された容器であり、接続を意図する麻酔システムの差異で、ユニバーサル バブル CAN、G-CAN、カートリッジタイプの 3 種類の容器から構成される。なお、本品は単回使用であり再使用はできない。

【使用方法等】

本品と接続可能な麻酔装置：

本品	接続可能な既承認医療機器の製品名	承認番号
ユニバーサル バブル CAN	ファビウスGSシリーズ ドレーゲル全身麻酔装置 ファビウスGS	21400BZY00474000
	ファビウスGSシリーズ ドレーゲル全身麻酔装置 ファビウスTiro	21400BZY00474000

	カトー ドレーゲル全身麻酔装置	20600BZY00178000
	シセロEM ドレーゲル全身麻酔装置	21200BZY00497000
	ジュリアン ドレーゲル全身麻酔装置	20900BZY00557000
	ナルコメド GS	20900BZY00708000
	ドレーゲル全身麻酔装置 アポロ	21800BZX10109000
G-CAN	エイシス	21900BZX00741000
	エスパイア	21500BZY00187000
	アバンス ケアステーション	21600BZY00044000

※カートリッジタイプは汎用の麻酔器に使用する。

1. 使用前

1) 接続を意図する麻酔システムに合わせ、ユニバーサル バブル CAN、G-CAN、カートリッジタイプを選択する。

2) 麻酔システムに本品を取り付ける。

○ユニバーサル バブル CAN の場合：

上部接続カバーを一旦取り外して、接続カバーを先に麻酔システムに取り付けた後、再び上部接続カバーにキャニスタ本体を接続する。

○G-CAN 又ユニバーサル バブル CAN（変更モデル）の場合：

上部接続カバーと麻酔システムを直接接続する。

*○カートリッジタイプの場合：

プラスチックの包装を完全に取り去ってカートリッジを吸収剤トレイに設置し、異物がカートリッジに付着してガスがカートリッジから漏れることがないように設置する。

2. 使用中

麻酔システムを作動させる。

3. 使用后

1) 麻酔システムを停止し、本品を取り外す。

2) 本品は一回限りの使用であり再使用できないので、使用後は破棄をする。

○交換時期については【保管方法及び有効期間等】の、

3. 使用期間を参照すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品と接続する麻酔装置の添付文書、取扱い説明書を必ず参照すること。
2. 本品とほかの麻酔回路が確実に接続されていることを、接続時及び使用時に確認すること。
3. 本品に衝撃を加えないこと。一度落下させた製品は破損している可能性があるため使用しないこと。
4. 使用後は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

直射日光・紫外線の当たる場所および高温多湿の場所を避け、清潔な場所に保管すること。

※高温多湿で保管した場合、二酸化炭素吸収剤が変色する場合があるが、性能上は、特に問題がない。また、低温で保管した場合、固まる場合があるが、性能上は、特に問題がない。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（自社データ）による]

＜使用期間＞

使用すると白色がアムソーププラスの二酸化炭素吸収量が増加してきたことを示す濃い紫色へと変化する。濃い紫色がボトルの半分以上になったら交換すること。色調変化は視覚で確認出来るようにする為に加えられた特徴であり、臨床上では吸収剤の消耗度合いをカブノメーターで確認を行い、交換すること。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル
TEL：03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL：03-3356-8377 FAX：03-3356-8380

外国製造業者

Armstrong Medical Ltd（北アイルランド）

