

*2023 年 5 月作成（第 2 版）
2017 年 7 月作成（第 1 版）（新記載要領に基づく作成）

器 06 呼吸補助器
管理医療機器 エアロゾル気管切開用マスク JMDN：35179000

トラキオストミーマスク

再使用禁止

【警告】

患者の体動や固定状態などにより本品の装着位置にずれが生じた場合、気管切開チューブのコネクタロを塞ぎ、呼吸困難となるおそれがあるため注意するとともに、このようなリスクを考慮して本品の使用を検討すること。また、本品を使用する際は、患者の状態に応じて生体情報モニタを併用すること。


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*＜形状・構造＞

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：非フタル酸可塑剤）を使用。

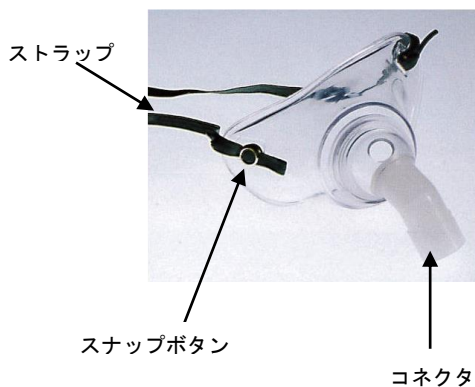

品 目	品 番	仕 様	包 装
トラキオストミーマスク	HT1060	成人用 エアロゾル 気管切開用	50 個/箱

＜原理＞

マスクが患者の気管切開部に覆うようにして当てストラップを頸部に回してスナップボタンを留めて固定し、エアロゾル化した水粒子を含む空気、酸素又は空気と酸素の混合ガスを供給する。

【使用目的又は効果】

気道に酸素ガス又はエアロゾル化した水粒子を含む空気、酸素又は空気と酸素の混合ガスを供給するために用いること。

【使用方法等】

1. マスクが患者の気管切開部を覆うようにして当て、頸部にストラップを付けて固定する。（外しておいたストラップを頸部にまわし、マスク本体のスナップボタンをはめる。）
2. コネクタ部に蛇管を接続する。
3. 処方通りに流量を調節する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用する前に漏れや閉塞がないことを確認してください。
2. 使用中は常に患者の状態及び本品の観察を行い、異常がないことを確認すること。
3. 本品の開口部を被覆しないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フジメディカル
TEL 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377

外国製造業者：

エヴィオン メディカル社
Avion Medical Sp. Z o.o
ポーランド

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社 **フジメディカル**