

機械器具 7 内臓機能代用器
高度管理医療機器
血液透析濾過器 JMDN コード 70536000
ヘモダイアフィルター FX HDF

再使用禁止

【警告】

- 1) 血液透析濾過中は、患者について常に十分な観察を行うこと。[患者によっては血液透析濾過中に血圧低下等の重篤なショック症状が現れることがある。]

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

形状・構造・構造ユニット

1. 構成

中空糸(束)、ポッティング(糸固定材)、O-リング、ハウジング、ヘッダー、血液側キャップ(O-リング付)及び透析液側キャップから構成される。本品の血液側流路は高圧蒸気滅菌処理がされており、非発熱性である。

2. 外観図と各部の名称

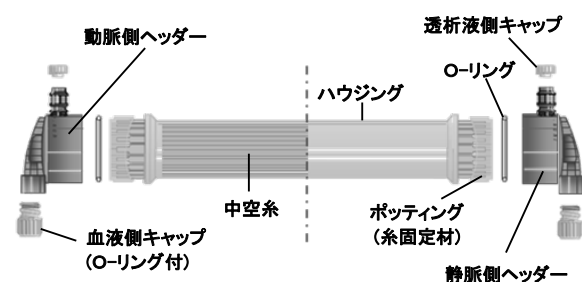

各部品名称	材 質
中空糸(束)	ポリスルフォン
ポッティング(糸固定材)	ポリウレタン
O-リング	シリコーン
ハウジング	ポリプロピレン
ヘッダー	ポリプロピレン

3. 中空糸の寸法等

モデル名	有効膜面積 (m ²)	内径 (μm)	膜厚 (μm)
FX 150 HDF	1.5	210	38
FX 180 HDF	1.8		

4. 包装

1~24 本入り/箱

5. 仕様

5.1. クリアランス (mL/min)

モデル名	尿素	クレアチニン	リン酸	ビタミンB ₁₂
FX 150 HDF	196	184	180	141
FX 180 HDF	198	190	184	149

(Q_B=200mL/min, Q_D=500mL/min, Q_F=0mL/min/m²)

5.2. 限外ろ過率 (mL/kPa/hr, [mL/mmHg/hr])

モデル名	限外ろ過率 (UFR)
FX 150 HDF	598 [80]
FX 180 HDF	667 [89]

(Hct=32±3%, TP=6.0±0.5g/dL, Q_B=200mL/min, TMP=50mmHg未満)

5.3. 血液側容量 (mL)

モデル名	血液側容量
FX 150 HDF	97
FX 180 HDF	118

5.4. 血液側圧力損失 (kPa, [mmHg])

モデル名	血液側圧力損失
FX 150 HDF	6.5 [48]
FX 180 HDF	5.3 [40]

(Hct=32±3%, TP=6.0±0.5g/dL, Q_B=200mL/min, Q_D=0mL/min)

原理・機能

作動・動作原理

本品を構成する中空糸はストロー状の形状をしており、内側を血液が流れ(血液側流路)、外側を透析液が流れる(透析液側流路)。半透膜である中空糸膜には大きさの異なる細孔が開いており、この半透膜を介し拡散及び限外濾過の原理により血液中の尿毒物質及び水が除去される。限外濾過により失う水分は補液により補う。

【使用目的又は効果】

慢性又は急性腎不全など腎機能が著しく低下した症例を適用とし、尿毒症によって体内に貯留した水、尿毒物質を除去するものである。

【使用方法等】

使用方法

1. 準備するもの

- | | |
|---|-----------|
| 1.1. 本品 | 1 本 |
| 1.2. プライミング用生理食塩液* | 1000mL 以上 |
| 1.3. 透析液 | 必要量 |
| 1.4. 抗凝固剤加生理食塩液 | 300mL 以上 |
| 1.5. 返血用生理食塩液* | 200mL 以上 |
| 1.6. 血液回路セット(動脈側及び静脈側)
(JIS T 3250 血液側接合部分に適合するもの) | 1 セット |
| 1.7. 輸液ライン
(血液回路セットに付属の場合は不要) | 1 セット |
| 1.8. 多用途透析装置 | 1 台 |
| 1.9. 補液回路 | 1 セット |
| 1.10. 補液 | 必要量 |

*多用途透析装置で作製された自動プライミング用の逆濾過透析液も使用可とする。

2. プライミング回路図(後希釈法の場合の例)

下図に示す。

3. 透析濾過前洗浄、プライミング及びブリークテスト

- 3.1. 清浄な環境下で包装から本品を取り出し、動脈側を下にして専用ホルダーに取り付ける。血液回路(動脈側及び静脈側)と本品を確実に接続する。
- 3.2. 動脈側血液回路の輸液ラインに生理食塩液を接続し、動脈側シャント接続側まで生理食塩液を満たし、クランプする。
- 3.3. 生理食塩液を、動脈側血液回路、本品、静脈側血液回路に充填し、動脈側血液回路及び静脈側血液回路の先端をクランプする。
- 3.4. 静脈側血液回路末端を本品の下方約 1m に位置させ、静脈側血液回路末端のクランプを外す。この時、本品の静脈側に 70～80mmHg 程度の陰圧がかかる。静脈側血液ポート及びその周辺に気泡が連続して発生していないか確認する。
- 3.5. 血液ポンプに動脈側血液回路を取り付け、流量 100mL/min で生理食塩液を 1000mL 以上流出させ、気泡を完全に除去する。
- 3.6. 本品の透析液ポート部に透析液回路を接続し、透析液を 1500mL 以上流す。
- 3.7. 抗凝固剤加生理食塩液を輸液ラインから流量 100mL/min で 300mL 以上流し、気泡のないことを確認した後、静脈側血液回路、動脈側血液回路、輸液ラインの順にクランプする。
- 3.8. 補液回路を補液に接続し、回路内が補液で充填されたら補液を止め、血液回路に接続する。

4. 血液透析濾過開始

- 4.1. 動脈側血液回路と患者の動脈側シャントなどのブラッドアクセスを接続する。
- 4.2. 動脈側及び静脈側血液回路のクランプを外し、血液ポンプを 50～100mL/min で回転させ、血液を流し始める。
- 4.3. 静脈側血液回路のドリップチャンバー内に血液が到達した時点で、血液ポンプを一旦止める。
- 4.4. 静脈側血液回路のドリップチャンバーより患者側のラインに気泡がないことを確認後、静脈側血液回路と患者の静脈側シャントなどのブラッドアクセスを接続する。次に、血液ポンプを 50～100mL/min で回転させ、血液の灌流を開始する。
- 4.5. 本品より気泡が出ないことを確認後、本品を反転させ動脈側を上にし、血液ポンプの流量を適正値に上げて、透析液、補液を流し血液透析濾過を開始する。


【推奨流量条件】

血液側流量 = 150～300 mL/min

透析液側流量 = 400～600 mL/min

5. 血液透析濾過中

- 5.1. 除水量又は限外濾過圧と補液量を患者ごとに設定する。設定に際しては患者の状態および本品の限外濾過率を考慮すること。
- 5.2. 治療中は除水量、補液量、患者の状態を定期的に観察する。

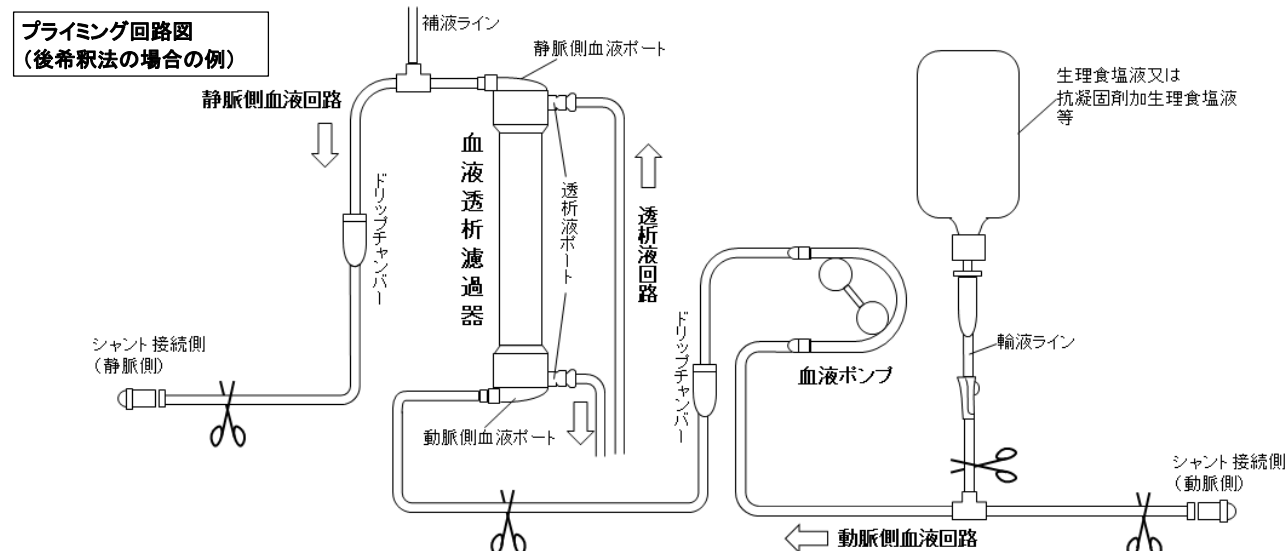

- 5.3. 本品及び血液回路のリーク、白糸、よじれ等の異常がないことを継続的に観察する。
- 5.4. リークが疑われる場合は、本品の透析液出口より採取した透析液を、潜血反応試験紙を用いて判定する。

6. 返血

- 6.1. 補液、透析液の供給を停止し、除水も停止する。
- 6.2. 血液流量を 50～100mL/min に下げた後、血液ポンプを一時停止する。動脈側血液回路をクランプし、患者の動脈側シャントなどのブラッドアクセスより動脈側血液回路を外す。
- 6.3. 気泡が混入しないように動脈側血液回路の輸液ラインにあらかじめ用意した生理食塩液 100～200mL を接続する。血液ポンプを流量 50～100mL/min で回転させ、本品及び血液回路内の血液を返血する。
- 6.4. 生理食塩液が静脈側血液回路末端付近まで達した時点で、静脈側回路をクランプし、血液ポンプを停止する。患者の静脈側シャントなどのブラッドアクセスより静脈側血液回路を外す。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 透析濾過前洗浄、プライミング及びブリークテスト

- 1.1. 血液回路との接続は、垂直に嵌合し緩みなく確実になされていること、ねじれていないことを確認してから使用してください。[接続が不完全な場合は、プライミング時に生理食塩液漏れ、血液透析濾過時に血液漏れを生じるおそれがある。]
- 1.2. コネクターを接続する場合は、過度な締め付けをしないでください。[コネクターが外れなくなる又はコネクターが破損する可能性がある。]
- 1.3. 血液回路を血液透析濾過器に接続する際は、血液回路を強くねじ込むと血液ポート部が破損する場合があるので注意してください。
- 1.4. 透析液ポートに局所的に大きな力が加わった場合は、透析液ポート部が折れたり、ポート根元部に亀裂が入ったりすることがあるので注意してください。
- 1.5. 洗浄／プライミングを行わなかったり、不足したりした場合には溶血又は血液凝固を起こすリスクがあるので、手順に従い適切に行ってください。
- 1.6. 生理食塩液の代わりに電解質輸液を用いることができます。
- 1.7. 本品を使用する前に必ずブリークテストを行ってください。
- 1.8. 気泡が継続的に発生し、リークが疑われる場合は使用しないでください。

2. 血液透析濾過開始

- 2.1. 血液凝固防止のための抗凝固剤の種類、投与方法及び投与量等は、患者の状態によって異なるので、適切に行ってください。
- 2.2. 血液透析濾過前及び血液透析濾過中に薬剤を投与する場合は、薬剤が血液透析濾過により除去されたり、吸着されたりすることがあるので、薬剤の種類、投与方法、投与量等に注意してください。

【使用上の注意】

＜使用注意(次の患者には慎重に適用すること)＞

- 特に次の患者には低血液流量、低除水流量で開始し、患者の状態に十分注意してください。[血液透析濾過時に血圧低下、不均衡症候群などが起こることがある。]
 - 1.1. 本品を初めて使用する患者
 - 1.2. 低体重・低栄養・導入期の患者、循環器合併症患者といった急激な血液濃度の変化や急激な除水に耐えられない患者
 - 1.3. 本品を使用する前に血液透析を行っていた患者
 - 1.4. 本品を使用する前により小膜面積の血液透析濾過器、膜材質又は性能の異なる血液透析濾過器を使用していた患者
 - 1.5. 体重増加が大きく、短時間に急激な除水を必要とする患者
- 次の患者については血液透析濾過中、常に十分な観察を行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行ってください。[血圧低下等の症状が起こることがある。]
 - 2.1. 本品を初めて使用する患者
 - 2.2. アレルギー、過敏症の既往歴のある患者
 - 2.3. これまでに血液透析又は血液透析濾過で血圧低下を経験したことがある患者
 - 2.4. 炎症反応、アレルギー反応、過敏症、又は感染症等により免疫機能が亢進している患者
 - 2.5. 降圧剤(アンジオテンシン変換酵素阻害剤、Ca 拮抗剤等)を使用している患者

＜重要な基本的注意＞

- 本品の使用で過敏症を起こしたことがある患者については、本品は使用しないでください。
- 血液透析濾過中の異常な症状、症候の発生を避けるため、血液流量、透析液流量、濾過流量、補充液流量及び除水速度を患者の状態に合わせて設定してください。
- 補充液量の制御・監視が可能な装置を用い、除水管理には UF コントローラーを使用してください。血液透析濾過中の除水過多や水分過剰による異常な症状の発生を避けるため、治療中に補充液量、濾液量及び除水量の正確な監視をしてください。
- 治療条件によっては、アルブミン等の蛋白質の損失量が多くなる可能性があるため、患者の状態や血清アルブミン値を観察してください。
- 本品は 79kPa(600mmHg)以下の圧力で使用し、血液透析濾過中は血液回路内圧を監視してください。
- 透析液の逆ろ過、逆拡散が起こることがあるので、清浄な透析液を使用してください [①](#)。なお、透析液の清浄度基準については超純粋透析液水質基準 [②③](#)を参照してください。
【主要文献及び文献請求先】主要文献 [①](#)、[②](#)、[③](#)参照)
- 透析液を補充液として使用する場合には、オンライン HDF の実施が許可された装置を用いてください。なお、透析液の清浄度基準についてはオンライン補充液水質基準 [②③](#)を参照してください。
【主要文献及び文献請求先】主要文献 [②](#)、[③](#)参照)
- 包装は使用直前に開封し、洗浄・プライミング終了後は速やかに血液透析濾過を開始してください。[開封後速やかに使用しないと感染に至るおそれがある。]
- 血液透析濾過器内及び血液回路内に空気を混入させないように十分注意してください。[空気が混入していると血液凝固等の原因になることがある。]
- 本品の使用中は、定期的に接続部の緩み、気泡の発生・混入、リーク、血液凝固、溶血、破損、血液漏れ、透析液漏れ、空気混入および詰まり等を確認してください。また、異常が認められた場合には、血液透析濾過を中止するなど適切な処置を行ってください。
- ハウジングや中空糸など製品が破損するリスクがあるので、本品の運搬、操作時には振動や衝撃を避けてください。
- 本品を鉗子等で叩かないでください。[ハウジング、ヘッダー、中空糸が破損するおそれがある。]
- 血液ポート及び透析液ポートの栓が外れている場合は使用しないでください。

- 本品にアルコール等の有機溶剤製品を含む薬剤が付着しないように十分注意してください。[変形や亀裂が発生する可能性がある。]
- 返血を行うときには生理食塩液あるいは電解質輸液による置換返血法を用いてください。
- あらかじめ透析液側接続部(カブラ)に緩みがないことを確認してから使用してください。使用中は本品の破損又はカブラの摩耗、接続部の緩みによる透析液漏れ又は空気混入等について定期的に確認してください。[透析液側接続部の接続不良により過除水が起こる場合がある。]

＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)＞

併用注意(併用に注意すること)

海外においてある種の合成膜を用いた血液透析で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤を服用中の患者が、透析中にアナフィラキシー様症状を発現した報告有り [④](#)。

【主要文献及び文献請求先】主要文献 [④](#)参照)

＜不具合・有害事象＞

重大な不具合・有害事象

重大な不具合

1. 中空糸破損等

まれに中空糸の破損又はOリングシール不良により、血液リークを招くおそれがある。[血液透析濾過を中止するなど適切な処置を行うこと。]

重大な有害事象

1. ショック、アナフィラキシーなどのアレルギー、過敏症

ショック、アナフィラキシーなどのアレルギー、過敏症が現れることがある。[異常が認められた場合には使用を中止するなどの適切な処置を行うこと。特に、重度の過敏症又は過敏症様症状が起きた場合は、血液透析濾過を中止し、血液透析濾過器等の体外循環中の血液は返血しないこと。]

2. 不均衡症候群

血液透析濾過導入時、又はより高性能の血液透析濾過器に変更する場合は、血液透析濾過中、不均衡症候群(頭痛・嘔気・嘔吐・胸痛・悪心・血圧低下・筋痙攣・しびれ感・倦怠感・不安感など)が現れることがある。[異常が認められた場合には使用を中止するなどの適切な処置を行うこと。]

その他の不具合・有害事象

その他の不具合

ハウジング等の破損、接続不良に伴う液漏れなどの不具合がまれに発生する場合がある。

その他の有害事象

一般的に、血液透析濾過中又は終了後にいくつかの症状が起こることが報告されている [⑤](#)。例えば、患者、治療パラメータ、器材、プライミング手順、透析液、血液透析濾過器、血液凝固剤、薬物治療などの要因が考えられる。したがって、個々の患者の特性や治療に対する許容度、臨床的必要性に基づいて血液透析濾過器を選択し、治療パラメータの選択と監視を行うことが、有害事象を抑える上で重要である。本品使用中に、患者に万一異常な症状が認められた場合(例えば、頭痛、嘔気、嘔吐、胸痛、下痢、血圧低下、血圧上昇、呼吸困難、呼吸停止、顔面紅潮、紅斑、動悸、心悸亢進、眼瞼浮腫、眼充血、発熱、悪寒、異常発汗、筋痙攣、耳鳴り、搔痒感、気分不快、意識消失、胸部不快感、胸部うつ血、咳き込み、気管支痙攣、顔色不良、腹痛、背部痛、頻脈、倦怠感、味覚異常、嗅覚異常、血小板減少、白血球減少、蕁麻疹、発疹、発赤、浮腫などの兆候あるいは症状)は、医師の指示により、適切な処置を行うこと。

【主要文献及び文献請求先】主要文献 [⑤](#)参照)

本品のご使用に際して不具合、その他の異常の発見、並びに製品に関するご質問等に関しては、下記連絡先までご連絡をお願い致します。

<その他の注意>

血液透析濾過装置の操作方法については、装置の添付文書及び取扱説明書に従ってください。

【臨床成績】

臨床試験成績

3か月以上慢性維持オンラインHDFを実施している末期腎不全患者13例に対し、2週間(施行7回)の臨床試験を実施したところ、本製品の血液透析濾過療法における安全性が確認された。
治験期間中に発生した治験機器との因果関係が疑われた不具合・有害事象は1件(血小板減少)で非重篤であった。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管の条件

直射日光、紫外線、高温多湿、水漏れ、埃、振動の激しい場所を避けて、5～30℃の清潔な場所に保管してください。

有効期間

使用期限は、本体ラベル及び外箱ラベルに記載。

** * 【主要文献及び文献請求先】

主要文献:

- 1) Ronco C, Brendolan A, Feriani M, et al. A new scintigraphic method to characterize ultrafiltration in hollow fiber dialyzers. *Kidney Int* 1992; 41:1383-1393.
- 2) 秋葉 隆, 川西 秀樹, 峰島 三千男, 他. 透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準 2008. *透析会誌* 2008; 41(3):159-167.
- 3) 秋葉 隆, 川西 秀樹. *透析会誌* 2008; 41(7):457.
- 4) 医薬品副作用情報 No.115, 1992 年 7 月, 厚生省薬務局
- ** 5) Daugirdas JT, Ing TS, 他著, 飯田 喜俊, 他訳. 血液透析中の合併症. *臨床透析ハンドブック(第 4 版)*, メディカル・サイエンス・インターナショナル

** 文献請求先:

- * フレゼニウス メディカル ケア ジャパン株式会社
〒828-0045 福岡県豊前市大字皆毛 92-7
電話番号:0979-64-8510

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** 製造販売業者:

フレゼニウス メディカル ケア ジャパン株式会社
〒828-0045 福岡県豊前市大字皆毛 92-7
電話番号:0979-64-8510
<https://freseniusmedicalcare.com/ja-jp/>

製造業者:

フレゼニウス メディカル ケア ドイツ GmbH, ドイツ
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH