

一般医療機器 類別: 器 58 整形用機械器具
一般名称: 骨手術用器械 (JMDN コード: 70962001)


クイックコネクターハンドル(T型ハンドル青色・1/4スクエア)

【禁忌・禁止】

本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損等の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状等

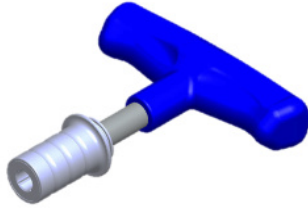

材質: ステンレス鋼、シリコン
(ステンレス鋼にはクロム及びニッケルが含まれている)

2. 原理

本品を併用する手術器械に装着し、手で握ることにより、その器械の操作を行うことができる。

【使用目的又は効果】

本品は再使用可能な手術器械であり、骨接合手術等の骨手術のために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 本品は未滅菌のため使用前に滅菌すること。滅菌は【保守・点検に係る事項】の「滅菌方法」により行うこと。
- (2) 本品を併用する手術器械に装着して、その器械の適切な操作を行うために用いる。
- (3) 使用後は【保守・点検に係る事項】の「使用者による保守点検」により洗浄すること。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 折損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- (2) 滅菌前に、本品に損傷、変形等の異常がないか点検すること。
- (3) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (4) 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は、破片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は摘出等の適切な処置を施すこと。
- (5) 磨耗粉が生じた場合は、速やかに洗浄し除去すること。
- (6) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚染物を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- (2) 損傷・変形等がある器械は、識別した上で再使用しないこと。
- (3) 滅菌は、正しく整備、校正された滅菌器を使用すること。
- (4) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ、使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。強アルカリ/弱酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (5) 本品がクローンツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が疑われる場合、破棄処分すること。

2. 不具合・有害事象

(1) 重大な不具合

- 1) 破損
- 2) 変形
- 3) 磨耗

(2) 重大な有害事象

- 1) 血管、神経、組織、骨、
- 2) 感染
- 3) 過敏症(アレルギー反応)
- 4) 破損片の体内遺残
- 5) 本品の不具合によって起こる手術時間の延長、手技の変更及び再手術

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れおよび高温多湿を避け、室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検〉

- (1) 使用後は、分解可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを検査すること。
- (2) 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
- (3) 汚れた器械は 5 分間以上洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄にくい箇所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
- (4) 壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないようにブラシ等で洗浄すること。器械にスライド機構やヒンジがある場合は、その部分を動かして残った血液や異物等を取り除くこと。また、管形状部は柔らかいナイロンブラシ又はパイプクリーナーを使用し、その後異物を取り除くこと。ブラシが届かない内部は酵素洗浄溶液を満たして洗浄し、その後洗い流すこと。
- (5) 超音波洗浄により中性洗剤を用い 10 分間以上洗浄すること。
- (6) 器械は温かい精製水(ろ過、蒸留、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。
- (7) 最終洗浄後は、直ちに乾燥させること。できるだけフィルターを通した圧縮空気等で内部を乾燥させること。

〈滅菌方法〉

本品は医療機関内において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。

・高圧蒸気滅菌の場合

サイクル: 前真空

温度	時間
121℃	20 分
132℃	10 分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕 株式会社フジフレックス

電話: 0743-72-0888