

一般医療機器 類別:器 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般的名称:ガイド (JMDNコード:37150000)

ジョーンズ骨折用ドリルガイドⅡ

疑われる場合、破棄処分すること。


【禁忌・禁止】

- 本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1.形状等

本品は、他の物体を適正な進路に導くために用いる手術器械である。

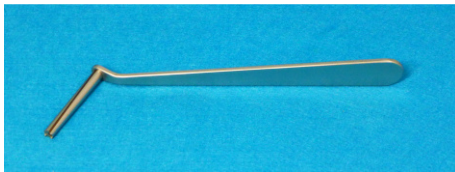

原材料(材質):ステンレス鋼
(ステンレス鋼には、クロム及びニッケルが含まれている。)

2.原理

本品を使用することにより、他の物体を適正な進路に導く、又は切開部、切断部、埋込み部の正確な位置を確認、確保することができる。

**【使用目的、又は効果】

本品は、他の物体を適正な進路に導くために用いる装置、器具又は付属品である。

**【使用方法等】

1.使用方法

本品は、補助具として目的部位にて、他の物体を適正な進路に導く、又は切開部、切断部、埋込み部の正確な位置を確認、確保する。

2.使用方法に関連する使用上の注意

- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に、必要以上の力を加えないこと。
- 滅菌前に、本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。特に先端鋭利部にバリなどがないことを確認すること。
- 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- 併用して使用する手術器械がある場合は、事前に組み合わせ、異常なく使用できることを確認すること。
- 医師及び手術スタッフは、使用前、使用中、使用後において本品の正常性を確認すること。
- 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は破片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は、摘出等適切な処置を施すこと。
- 磨耗粉が生じた場合は、速やかに洗浄し除去すること。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。

**【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚染物を除去し、感染防止のため洗浄・消毒すること。
- 損傷・変形等がある器械は、識別した上で返却すること。
- 滅菌は、正しく整備、校正された滅菌器を使用すること。
- 塩素系及び過酸化水素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ、使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。
- 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器械の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が

2.不具合・有害事象

本品の使用により以下の不具合・有害事象が起こる可能性がある。

- 重大な不具合
破損、変形、磨耗等の不具合が現れた場合は、使用を中止し適切な処置を行うこと。
- 重大な有害事象
以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。
 - 感染
 - 塞栓(脂肪、血液等)
 - 骨折
 - 過敏症
 - 体内遺残
- その他の有害事象
以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。
 - 関節の亜脱臼又は脱臼
 - 関節部の一過性または永続性の神経損傷
 - 血管損傷

3.高齢者への適用

高齢者は、骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後、緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

**【保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法:水濡れおよび高温多湿を避け、室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後は、分解が可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを検査すること。
- 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
- 汚れた器械は5分以上洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい箇所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
- 壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないようにブラシ等で洗浄すること。器械にスライド機構やヒンジがある場合は、その部分を動かして残った血液や異物等を取り除くこと。また、管状形状の器械は、柔らかいナイロンブラシ又はパイプクリーナーを使用し、その後異物等を取り除くこと。ブラシが届かない管内部は酵素洗浄溶液を満たして洗浄し、その後洗い流すこと。
- 超音波洗浄により中性洗剤を用い10分以上洗浄すること。
- 器械は温かい精製水(ろ過、蒸留水、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。全てのルーメン、内部、スライド機構、ヒンジは動かしながら洗い流すこと。
- 最終洗浄後は、直ちに乾燥させること。できるだけフィルターを通した圧縮空気等で内部を乾燥させること。

<滅菌方法>

本品は、以下の推奨滅菌条件若しくは医療機関内で担保された滅菌条件にて滅菌を行うこと。

・高圧蒸気滅菌の場合

サイクル:前真空

温度	時間
121℃	20分
132℃	10分

(滅菌方法については、滅菌装置製造元の使用説明書に従うこと。)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

[製造販売業者]

株式会社フジフレックス

電話:0743-72-0888