

類別 器 0 9 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般的名称 歯科用 X 線ビームアラインメント装置 31828000
一般医療機器


販売名 ワイドウイングⅡ型

【警告】
(記載なし)

【禁忌・禁止】
(記載なし)

【形状・構造及び原理等】

1. 本体の形状、構造

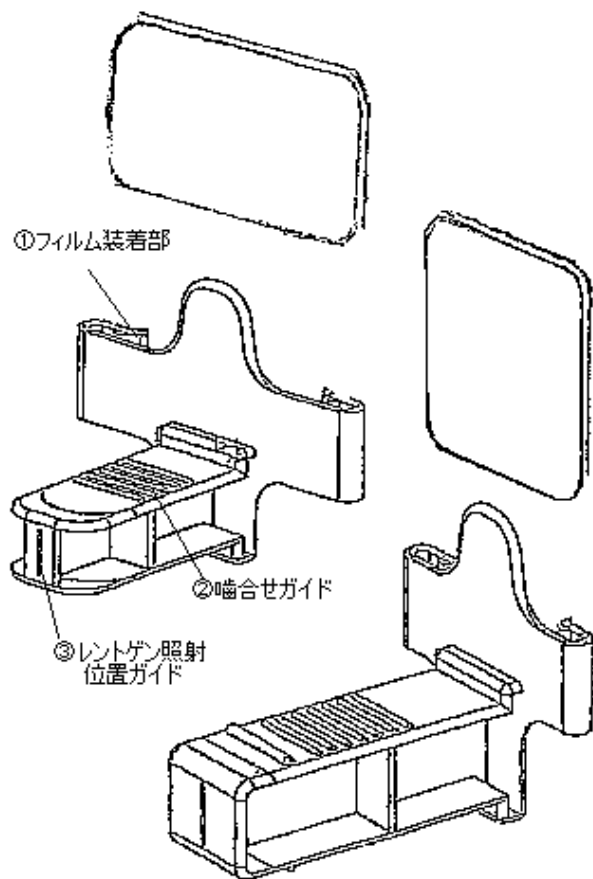

① フィルム装着部

この部分にレントゲンフィルム又はイメージングプレートを装着する

② 噛合せガイド

この部分を歯で噛み、ずれないように保持する

③ レントゲン照射ガイド

この位置にレントゲン照射筒の中心を合わせる

2. 原理

- ・本具にレントゲンフィルム又はイメージングプレートを装着し、凹凸の噛み合せガイド部分を歯で軽く噛むことでフィルムを撮影部位に保持できる
- ・本体正面のレントゲン照射ガイドにレントゲンの照射方向を合わせることで、容易に口内撮影におけるレントゲン照射位置とフィルムの位置を合わせることができる。
- ・手で押さえて保持する必要があるため、痛みもなくまた、レントゲン被ばくを最小限に抑えることができる。

【使用目的、効能又は効果】

- ・歯科用 X 線撮影時に、歯科用 X 線フィルム又はイメージングプレートを、本具に装着し、患者の口腔内に歯で挟み保持することにより、手で押さえることなくフィルムを保持し、照射位置を適正な位置に設定することができる。

【品目仕様等】

1. 品目

縦型 レントゲンフィルム又はイメージングプレートを縦向きに装着する

横型 レントゲンフィルム又はイメージングプレートを横向きに装着する

2. 仕様

口内撮影用レントゲンフィルム 標準サイズ (30mm×40mm) 及び、口内撮影用イメージングプレート 標準サイズ (30mm×40mm) に対応する

【操作方法又は使用方法等】

1. 撮影部位により縦型、横型を選択する。
2. レントゲンフィルム又はイメージングプレートを本具に装着する。
3. 患者の口腔内に入れ、撮影部位に対して適正な位置に合わせ、噛み合せガイド部を上下の歯で軽く噛むようにして、フィルムを保持する。
4. レントゲン照射筒の中心位置に、本具のレントゲン照射位置ガイドを合わせて、又、本具とレントゲン照射方向を水平に合わせ、撮影する

【使用上の注意】

1. 本製品は【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
2. 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
3. ポリエチレン製ですので、オートクレーブ (蒸気滅菌) は不可です。必ず、薬液消毒をお願いいたします。
4. 破損した商品は使用しないでください。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
高温（直射日光のあたるところ）多湿をさけ、通気性の良い管理を行うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 使用後は、感染防止のため、洗浄・消毒を行うこと。

【包装】

本体 1個

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フラット
神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345
FAX 078-412-2028

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
株式会社 フラット
神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345
FAX 078-412-2028