

類別 器09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般的名称 歯科用エックス線ビームアラインメント装置 31828000
一般医療機器

口内エックス線遮断プレート

【警告】

撮影前後には、薬液にて消毒すること。

【禁忌・禁止】

ひび、割れ、欠け、変色、破損等異常のあるものは使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は軟質性タングステンシートイメージングプレート（IP）と同形状に加工したものである。



2. 寸法 誤差±2mm

- 1 31×41 (mm)
- 2 22×31 (mm)
- 3 22×35 (mm)
- 4 24×40 (mm)
- 5 56×76 (mm)


上記の5種類で厚みはおおよそ0.5ミリである。

3. 原理

本品は口内撮影用のイメージングプレートの背面に重ね、イメージングプレートを透過したエックス線を防護する。

【使用目的、効能又は効果】

本品は口内撮影用のイメージングプレートの背面に重ねることによって口内法撮影時にイメージングプレートを透過したエックス線による撮影部位後方の被曝を防護し患者様の被曝量を軽減する。

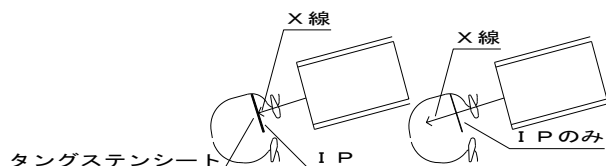

【操作方法又は使用方法】

清潔な状態のイメージングプレート（IP）の背面に重ねイメージングプレート保護袋に装着する。

撮影前後は、洗浄および薬液により消毒する。

【使用上の注意】

使用前後に、ひび、割れ、欠け、変色、破損等異常のないことを確認すること。

イメージングプレート（IP）の装着の際は使用方法の通り、正しく装着すること。

撮影前後は使用方法の通り消毒すること。

撮影後唾液等で著しく汚れた場合はきれいな布等で汚れを拭き取ってから消毒すること。

埃や汚れが付かぬようケース内に保管すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

貯蔵・保管方法：高温多湿を避け室内保存

使用期限：購入後1年

【保守・点検に係る事故】

使用前後に、ひび、割れ、欠け、変色、破損等異常のないことを確認すること。

使用後は、感染防止のため、洗浄および薬液により消毒すること。

【包装】

各サイズとも5枚1組。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フラット

兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4

TEL 078-412-2345

FAX 078-412-2028

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社フラット

兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4

TEL 078-412-2345

FAX 078-412-2028

製造業者

株式会社フラット

兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4

TEL 078-412-2345

FAX 078-412-2028

取扱説明書を必ずご参照下さい。