

類別 器09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般的名称 歯科用エックス線ビームアラインメント装置 31828000
一般医療機器（特定保守管理医療機器非該当）

I P保護袋（オクルーザル用）


【警告】

撮影前後には薬液にて消毒を行うこと。

【禁忌・禁止】

単回使用のため、再使用禁止。

1. 形状および構造

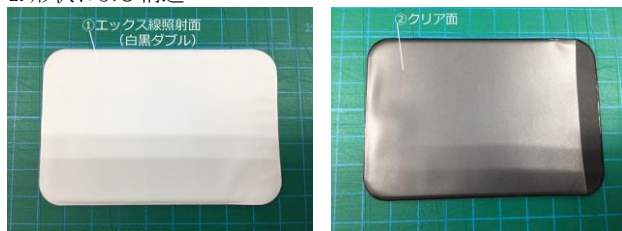

- ①エックス線照射面 有色のため、遮光性がある。イメージングプレートの照射面をこの面に合わせて挿入する。
②クリア面 透明になっているので、イメージングプレートが奥まで確実に挿入されているか視認することができる。

2. 寸法及び質量

オクルーザル用（サイズ4）

寸法 幅61×長さ89×厚み0.2（mm）

質量 約1g

3. 原理

本品は歯科口内エックス線撮影でのオクルーザル撮影において、イメージングプレートを保護し、位置合わせを行いやすくする。また、歯部と接触によるイメージングプレートへの傷や唾液の付着を保護することができる。

【使用目的、効能または効果】

口内撮影用のイメージングプレートを保護することで、エックス線ビームとの位置合わせを容易にすることができる。

また、唾液等の汚れから守ることで感染防止に役立ち、歯部との接触によるイメージングプレートのキズなどを防ぐ。

【操作方法または使用方法】

使用前に、傷、汚れがないかを確認し、薬液にて消毒する。

本品のエックス線照射面とイメージングプレートのエックス線照射面を合わせて、本品に挿入する。その際、咬合撮影の特性上、患者が噛んでしまい傷がつくことを防ぐため、別途バイトプロテクター（オクルーザル用）を合わせて使用することが望ましい。また、クリア面より視認し、イメージングプレートが確実に奥まで挿入することを確認する。（右図参照）

撮影が終了したら、唾液などを拭き取り、消毒し、イメージングプレート、バイトプロテクターを取り出し、本品は単回使用のため、医療廃棄物として廃棄処理を行う。

イメージングプレート挿入時

**【使用上の注意】**

本品の破れ破損した物は使用しないこと。
イメージングプレート（IP）の装着の際は使用方法の通り、正しく装着すること。
撮影前後は使用方法の通り消毒すること。
撮影後唾液等で著しく汚れた場合はきれいな布等で汚れを拭き取ってから消毒すること。
本品は単回使用用品のため再使用はしないこと。
高温多湿の場所を避け室温で保存すること。
埃や汚れが付かぬようケース内に保管すること。

【貯蔵・保管方法および使用期限】

清潔な容器に入れて保管し、直射日光・高温多湿の場所は避けること。
キズおよび変形や破損したら交換すること。
使用期限：購入後1年間

【包装】

1箱/100枚入り

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フラット
兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345
FAX 078-412-2028

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
株式会社フラット
兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345
FAX 078-412-2028
製造業者
株式会社フラット
兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345
FAX 078-412-2028