

鼻口センサ SOMNO

【禁忌・禁止】

*＜使用方法＞

- * 生命維持等の環境下や、無呼吸モニタとして使用しないこと。[本品は診断を目的として使用されるものであるため。]
- * 本品のケーブルは、首に巻きつかないように配置すること。[窒息のおそれがあるため。]

*＜適用対象（患者）＞

- * 本品は小児および 2 歳未満の乳児に、呼吸あるいは SIDS（乳幼児突然死症候群）の監視を目的として使用しないこと。[本品は診断を目的として使用されるものであるため。]
- * 皮膚に炎症があるか、過敏症のある患者の場合は、本品を使用しないこと。


*＜併用医療機器＞[相互作用の項参照]

- * 可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内で使用しないこと。[爆発又は火災をおこすことがあるため。]
- * 高圧酸素治療装置と併用しないこと。[爆発又は火災をおこすことがあるため。]
- * 磁気共鳴画像診断装置（MRI）と併用しないこと。[誘導起電力により局所的な発熱で患者が熱傷を負うことがあるため。]
- * 除細動器と併用しないこと。[熱傷を生じさせることや機器が破損する恐れがあるため。]
- * 電気手術器（電気メス）と併用しないこと。[電気メスからの電流が電極に流れ、熱傷を生じることがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

*1. 外観


- ・鼻口センサ SOMNO

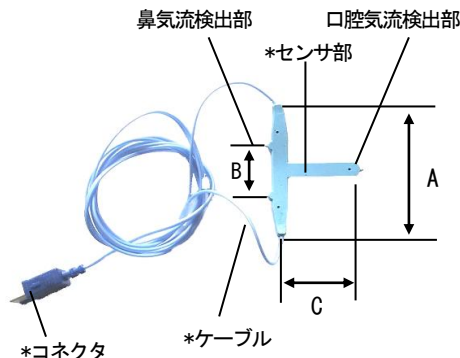

*原材料又は構成部品

名称	原材料
センサ部	一般電気部品、医療用シリコン
ケーブル	一般電気部品

- ・オプション品
SOMNO延長ケーブル

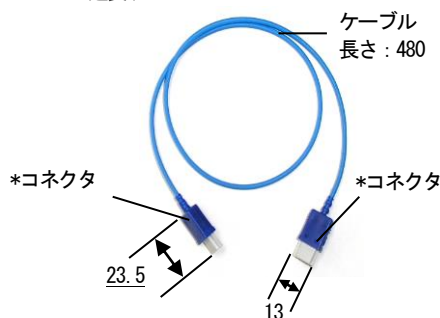

寸法単位：mm
公差：±10%

*2. 構成

本品は、センサ、ケーブル及びコネクタにより構成され、センサの大きさにより、大人用と小児用の 2 種類ある。
尚、オプション品として SOMNO 延長ケーブルがあり、補充、修理のため個別に又は他の睡眠評価用センサと組み合わせて輸入及び販売することがある。

	A	B	C	ケーブル長
鼻口センサ SOMNO 大人用	55	20	24	970
鼻口センサ SOMNO 小児用	40	10	11	970

寸法単位：mm
公差：±10%

*3. 包装

名 称	包 装
鼻口センサ SOMNO	1 個/袋
SOMNO 延長ケーブル	8 本/袋

*4. 作動・動作原理

患者の鼻及び口腔からの呼吸気流による温度変化をサーミスタが検出し、電気信号に変換する。


【使用目的又は効果】

本品は、終夜睡眠ポリグラフィによる睡眠時障害検査において、睡眠時呼吸障害の程度を評価するために睡眠評価装置に記録する患者の鼻及び口腔の呼吸気流を検出するセンサである。

【使用方法等】

1. センサの装着

- 1) 本品のケーブルを患者の耳にかけ、センサを鼻と口の間に装着する。
- 2) 本品の鼻气流検出部が鼻腔のすぐ下に、口腔气流検出部が口の正面になるよう装着位置を調節する。なお、本品のセンサを軽く曲げて、装着位置を調節することもできる。
- 3) 本品のスリーブを患者の顎に向け移動させ、センサが適切に固定されるように、ケーブルの長さを調節する。
- 4) 睡眠評価装置の取扱説明書及び添付文書に従い、本品のコネクタを睡眠評価装置のセンサ接続部に接続する。
- 5) 睡眠評価装置の取扱説明書及び添付文書に従い、測定を開始する。

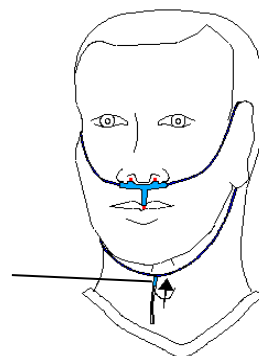

センサが適切に固定されるように、スリーブを移動させ、ケーブルの長さを調節する。

・SOMNO 延長ケーブルの使用

- 1) 本品のコネクタを SOMNO 延長ケーブルのコネクタの一方に接続する。
- 2) SOMNO 延長ケーブルのコネクタのもう一方を睡眠評価装置に接続する。

2. 使用後

- 1) スリーブを移動してケーブルを緩め、患者からセンサを外す。
- 2) 睡眠評価装置の取扱説明書及び添付文書に従い、本品のコネクタを睡眠評価装置のセンサ接続部から取り外す。

**＜併用医療機器＞

本品は、製造販売業者が指定する睡眠評価装置と組み合わせて使用する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- * 本品の装着位置や装着状態及び患者の皮膚状態や血液循環に異常がないことを確認すること。
- * 皮膚の発赤やかぶれなどの過敏症状が現れた場合は、使用を中止すること。
- ・本品は、健康な皮膚にのみ使用すること。
- * 本品は常に清掃、消毒を行い、清潔にしておくこと。
[本品を介して感染する可能性があるため。]
- ・本品は完全に乾かしてから使用すること。
- * 本品を無理に曲げないこと。[断線や破損のおそれがあるため。また、破損により負傷するおそれがあるため。]
- * 本品は、医師又は医師の指示を受けた医療従事者のみが使用すること。
- ・本品を使用する前に、各部に損傷等がなく、各部の作動に問題のないことを確認すること。
- * 本品を使用する前に、本品の添付文書及び併用する睡眠評価装置の取扱説明書及び添付文書を参照すること。
- * 本品に摩耗、破損等がある場合には使用しないこと。
- ・本品を分解しないこと。
- * 適切な動作を保持するためケーブル接続を確認すること。
- ・本品の使用により皮膚の発赤やかぶれなどの過敏症状が現れた場合は、使用を中止すること。
- ・睡眠評価装置との接続を外すときは、コネクタをしっかりとつかんで外すこと。ケーブルを持って外さないこと。[ケーブルを無理に引っ張ると断線等の破損を引き起こすことがある。]

*＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MR 装置)	併用禁止	誘導起電力により局所的な発熱で患者が熱傷を負うことがある。
高圧酸素患者治療装置	併用禁止	爆発又は火災をおこすことがある。
可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内での使用	併用禁止	爆発又は火災をおこすことがある。
除細動器	併用禁止	熱傷を生じさせることや機器が破損する恐れがある。
電気手術器（電気メス）	併用禁止	電気メスからの電流が電極に流れ、熱傷を生じることがある。

*＜妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用＞

- * 本品は小児および2歳未満の乳児に、呼吸あるいはSIDS（乳幼児突然死症候群）の監視を目的として使用しないこと。[本品は診断を目的として使用されるものであるため。]

【保管方法及び有効期間等】

**1. 使用環境

温度範囲 5～40℃

湿度範囲 15～90%（結露なきこと。）

**2. 保管環境

温度範囲 -25～70℃

湿度範囲 10～90%（結露なきこと。）

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧・温度・湿度・風通し・日光に留意し、ほこり・塩分・イオウ分などを含む空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

<使用期間>

*測定回数：毎日使用して約100回[自己認証(自社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

*＜使用者による保守点検事項＞

消毒

- ・使用後は、除菌剤又は消毒剤で軽く湿らせた布で拭き、清潔にすること。

除菌剤

ミクロジッド：5分

テラリンプロテクト：5分

消毒剤

イソプロパノール 70%：5～10分

- ・本品を液体に浸さないこと。

- ・高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）は、行なわないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

株式会社フクダ産業

電話番号：04-7147-1622(代)

**外国製造元：

ソムノメディクス社

(SOMNOmedics AG)

ドイツ連邦共和国