

** 2015年6月22日 改定 (第3版)
 * 2015年6月16日 改定 (第2版)
 2014年12月4日 作成 (第1版)

再使用禁止

機械器具17 血液検査用器具
 35103000 手動式血球計数装置
 一般医療機器

C-Chip 血球計算盤

【禁忌・禁止】

再使用禁止
 キズ又はゴミの付着

【使用目的又は効果】

血液中の白血球数や血小板などの血球数、骨髓液中の有核細胞数、髄液中の白血球数、精液中の精子数などの細胞数の算定に使用する。
 顕微鏡を使用してDetection areaに描かれた格子内の細胞数を算定する。

【使用方法等】

よくかき混ぜたサンプルを、Sample injection areaに注入する。サンプルは毛細管現象によってDetection area内に浸透する。Detection area内の格子の上に顕微鏡のフォーカスを調整し、細胞数を算定する。
 詳細は、本体付属の取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

再使用は出来ません。
 表面は傷付き易いので取り扱いに注意してください。
 C-Chipを包装箱や個包装から取り出す際、サンプルを注入する際、また測定の際には周辺部を持ち、Sample injection areaやDetection areaに触れないようにしてください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 貯蔵・保管方法
- 常温・常湿
- 2) 有効期間
- 36ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者名称：フィンガルリンク株式会社
 住所：〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-6
 電話番号：03-6802-7145
 外国製造所の国名：大韓民国
 製造業者名称：INCYTO Co.,Ltd.

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造

手動の細胞計数に使用する使い捨てのプラスチック血球計算盤。
 サイズ：75 x 25 x 1.6mm

① NI Grid ② FR Grid ③ BT Grid (1枚2テスト)

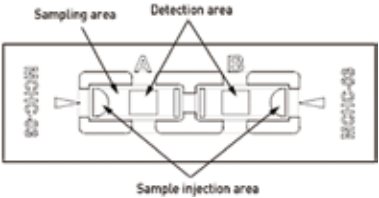

Detection area は、2枚のプラスチック製のプレートが接着された構造になっている。2枚のプレートが従来のスライドガラスとカバーガラスのような機能をもつため、カバーガラスは必要ない。

2) 原理

サンプルをSample injection areaに注入すると、毛細管現象によってDetection area内に浸透する。Detection areaに描かれた格子内の細胞数を数える事で、一定量中の細胞数を算定する。

3) 種類

① NI Grid 届出番号: 13B1X10181000011
 格子タイプ: NI (改良ノイバウエル)
 部屋の深さ: 0.1mm
 サンプル量: 10μl / 1テスト

② FR Grid 届出番号: 13B1X10181000012
 格子タイプ: FR (フックスローゼンタール)
 部屋の深さ: 0.2mm
 *サンプル量: 20μl / 1テスト

③ BT Grid 届出番号: 13B1X10181000013
 格子タイプ: BT (ビルケルチュルク)
 部屋の深さ: 0.1mm
 サンプル量: 10μl / 1テスト

取扱説明書を必ずご参照ください。