

機械器具 17 血液検査用器具
手動式血球計数装置（35103000）
一般医療機器
f スライド血球計算盤

再使用禁止**【禁忌・禁止】****〈使用方法〉**

- 1) 本品は単回使用品です。再使用しないでください。
- 2) キズ又はゴミの付着がないようにしてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、手動の細胞計数に使用する単回使用のプラスチック血球計算盤です。


2. 構成

本体（スライド、グリッド部、カバースライド）

3. 形状

- 1) スライド
- 2) グリッド部
- 3) カバースライド

[代表的写真]

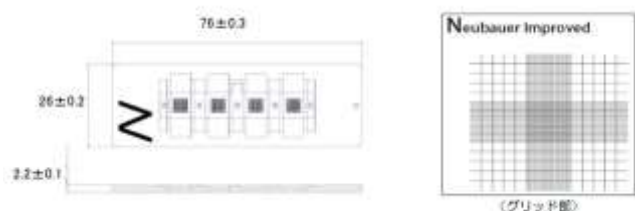

4. 寸法

D26±0.2×W76±0.3×H2.2±0.1 mm

5. 包装

20枚（80TEST） / 箱

6. 仕様

	格子タイプ	色調	サンプル 注入量	部屋の深さ
NI	改良ノイバウエル	透明	6 μ L	0.1 mm
BT	ビルケルチュルク	透明	6 μ L	0.1 mm
FR	フックスローゼンタール	透明	12 μ L	0.2 mm

7. 原材料

- 1) スライド/グリッド部/カバースライド:メタクリル酸メチル樹脂

8. 原理

本品は、検体注入口から検体を注入すると、毛細管現象によって展開されます。顕微鏡を通してグリッド部に描かれた格子中の細胞数を数えることで、一定量中の数を算定します。単回使用のプラスチック血球計算盤です。グリッド部上下には、プラスチック製のカバースライドが装着されているので、カバーガラスを使用する必要がありません。

【使用目的又は効果】

本品は、手動式の血球計算盤として機能し、一定の深さのくぼみのあるカバーガラスと線で四角く区切られた平面から構成されます。血液中の白血球数や血小板等の血球数、髄液中の白血球数等の細胞を、顕微鏡を通して、グリッド部に描かれた格子中の細胞を計算します。

【使用方法等】

使用する f スライドの取扱説明書又は添付文書を熟読し、理解した上で使用してください。

1. 操作方法

- 1) 検体注入口より、定量[NI・BT: 6 μ L、FR: 12 μ L]を、サンプルピペットを用いて注入します。
- 2) 顕微鏡にセットし、2～3分静置させます。
- 3) 顕微鏡をグリッド部に焦点を合わせ、細胞数を数えます。
- 4) 各種算出方法に従い、算定します。

>詳しくは取扱説明書をご参照ください。>

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 再使用はできません。
- 2) 表面は傷つき易いので、取扱いに注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光、水濡れを避け、常温で保管します。

2. 有効期間

24ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名称：フィンガルリンク株式会社

住所：東京都台東区元浅草2-6-6

電話番号：03-6802-7145

FAX：03-6802-7156

製造業者名：深江化成株式会社