

機械器具（78） 家庭用電気治療器
家庭用低周波治療器 70986000
管理医療機器

ペースケア PC-300

【警告】

- 下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。[人体の損傷等が起こりうるため]
 - ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
 - 心電計などの装着型医用電気機器

【禁忌・禁止】

- お子様には使用せず、機器本体および電極パッドの上で遊ばないでください。[火災、爆発、感電、火傷の原因になるため]
- 浴室などの湿度の高いところや、入浴しながらの使用はしないでください。[火災、爆発、感電、火傷の原因になるため]
- 他の治療器や本製品の 2 台以上の同時使用はしないでください。[人体の損傷等が起こりうるため]

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

- 装置本体
- パッドコード
- 電極パッド
- 単 4 アルカリ乾電池


※構成品は単品でも販売される場合があります。

2. 寸法

- 装置本体

寸法：115mm×69mm×28mm（寸法公差±10%）

装置本体

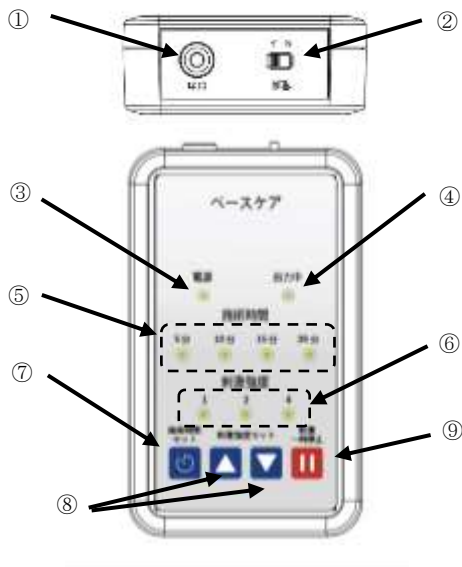

名称

- 出力端子(パッドコード端子)
- 電源スイッチ
- 電源 LED
- 出力中 LED
- 施術時間 LED
- 刺激強度 LED
- 施術時間セットボタン
- △▽ボタン（刺激強度セットボタン）
- 刺激一時停止ボタン
- 電池蓋

- パッドコード



- 電極パッド



3. 動作原理

装置本体、パッドコード、電極パッドにより、刺激強度に応じた刺激電圧を出力する装置である。

皮膚の表面より微弱な低周波電流を流して患部の治療に使用する。出力刺激パルスは＋位相側に規定パルス、－位相側に規定パルス、インターパルスタイムが規定時間で刺激周期は数十 Hz となっている。また刺激出力側と内部回路は内部電源であるが安全性を重視し、絶縁トランスで分離している。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

4.電気的定格

項 目	内 容
電源電圧	DC4.5V (単 4 アルカリ乾電池 3 本)

【使用目的又は効果】

肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。
一般家庭で使用する。

【使用方法等】

1 使用前の準備

- 1) 装置本体の電源スイッチが「切」側になっていることを確認します。
- 2) 装置本体の電池蓋を外し、単 4 アルカリ乾電池を挿入します。電池蓋を元に戻します。
- 3) パッドコードのコネクタを、装置本体の出力端子の奥まで差し込みます。
- 4) 電極パッド 2 枚を、施術を行う身体の部位に、貼り付けます。
- 5) 電極パッドのピンジャックと、パッドコードのピンプラグをそれぞれ接続します。

2 使用

- 1) 電源スイッチを入側にスライドし、電源を入れます。
- 2) 電源 LED が点灯することを確認します。
- 3) 適時、施術時間を設定します。施術時間は、施術時間セットボタンの押下により 5 ～ 50 分 (5 分間隔) に設定されます。
電源を入れた直後の初期値は 10 分です。施術時間は、施術時間 LED に表示されます。
- 4) △ボタンを押下し、刺激強度を 1 に設定すると、施術 (刺激出力) を開始します。
刺激が出力されている間は、出力中 LED が点灯します。
また、施術の残り時間に応じて、施術時間 LED の点灯が切り替わります。
- 5) 適時、刺激強度を変更します。
刺激強度は、△ボタンを押下すると上がり、▽ボタンを押下すると下がります。
刺激強度は、0 ～ 14 段階に設定され、刺激強度 LED に表示されます。
- 6) 刺激一時停止ボタンを押下する、または刺激強度を 0 に設定すると、刺激出力は直ちに停止します【施術の一時停止】。貼り付け位置を調整したい場合に使用してください。
刺激一時停止ボタンを押下した際は、刺激強度は 0 に強制されます。刺激強度を 1 に設定すると、施術を再開します。
- 7) 施術時間が経過すると、自動で刺激出力を停止し、施術を終了します。全ての LED が消灯し、装置は省電力モードに推移します。

3 使用後の処理

- 1) 装置本体の電源スイッチを切側にスライドし、電源を切ります。
- 2) 電極パッド、パッドコード、装置本体を取り外します。
- 3) 長期間使用しない場合は、乾電池を取り外します。

【使用上の注意】

本品の使用にあたっては、下記事項にご注意ください。
また取扱説明書の内容もご理解したうえでご使用ください。

1.次の人は、医師と相談してご使用ください。

- ・医師の治療を受けている人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に異常がある人
- ・妊娠している人、出産直後の人
- ・糖尿病の人
- ・体温 38℃以上 (有熱期) の人
- ・安静を必要とする人
- ・急性 (疼痛性) 疾患のある人
- ・パッドが肌にあわない人
- ・皮膚に異常 (感染症、創傷など) のある人
- ・発しん、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は使用を中止する。
- ・しばらく使用しても効果が現れない人

2.機器を使用する前には次の事項に注意してください。

- 1) 当社指定の付属品以外は使用しないこと。

- 2) 装置本体、付属品が正確かつ安全であることを確認してください。
- 3) 使用前に外観及び機能上の問題がないことを確認してください。

3.機器の使用中は次の事項に注意してください。

- 1) 機器全般に異常のないことを絶えず注意してください。
- 2) 機器に異常が発見されたときは使用者に安全な状態で、機器の作動を止めるなど適切な処置をとってください。
- 3) 電極パッドは異常のある皮膚の上には使用しないこと。
- 4) 使用中に発疹、発赤、かゆみ等の皮膚症状が現れた場合は、直ちに使用を中止すること。
- 5) 電極パッドを強く擦らないこと。
- 6) 近くで携帯電話などを使用しないでください。

4.機器の使用後は次の事項に注意してください。

- 1) 定められた手順で使用前の状態に戻してください。
- 2) 機器は次の使用に支障のないよう必ず清浄にしておいてください。

5.本装置が故障した場合は、直ちに販売業者へ連絡し、修理を行ってください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

保管場所については次の事項に注意してください。

- 1.装置本体、付属品などは、次の使用に影響がないように洗浄し、湿気の少ない所に整理・保管してください。
- 2.長時間ご使用にならない場合は、乾電池を取り外してください。
- 3.保存温度・湿度: -10～+40℃ 10～85%RH

<耐用期間>

装置本体: 5 年[自己認証 (当社データによる)]

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- 1.本品の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
- 2.使用者による日常点検を必ず行ってください。
- 3.しばらく使用しなかった機器を再使用する際には使用前に必ず機器が正常にかつ安全に動作することを確認してください。
- 4.清掃、消毒時には、電源を切ってから行ってください。
- 5.本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませ、よく絞った布で拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 6.パッドの粘着面が汚れて貼りつきにくくなったら、水洗いしてください。
- 1)水洗いの目安は、繰返し 5 回目使用終了後 1 回水洗いし、次回使用時、粘着力が回復しない場合は交換してください。
パッドは消耗品です、接着面が傷んだ時は、使用を中止し、販売業者にお求めください。
パッドの寿命は、水洗いの頻度や肌の状態、保管状態で短くなる場合があります。
- 2)少量の水を粘着面に流しながら、指先で軽く洗う。
- 3.)水を切って、自然乾燥させる
ティッシュや布などで粘着面を拭かないでください。粘着面に貼りついてしまいます。
誤って貼りついてしまったときは、少量の水を粘着面に流しながら剥がしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: フィンガルリンク株式会社

住所: 東京都台東区元浅草 2-6-6 東京日産台東ビル 5 階

電話番号: 03-6802-7145

製造業者名: フィンガルリンク株式会社花巻工場

販売業者: 株式会社 TESS

住所: 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-9-15-101

電話番号: 022-353-9707

取扱説明書を必ずご参照下さい。