

機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 家庭用貼付型接触粒 JMDNコード：71026000

ミレゲルマ

【警告】


このプラスター（絆創膏）の一部に天然ゴムを使用しています。
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様
症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことが
あります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、
医師にご相談ください。

【禁忌・禁止】


- ・お肌に異常がある箇所には使用しないでください。
- ・切り傷、打ち身、捻挫その他による出血時は使用しないでください。
- ・骨折、ヤケド、筋肉の組織破壊などに対しては使用しないでください。
- ・高血圧、心臓、肝臓に障害のある方、脳障害のある方、妊婦は専門医
にご相談ください。
- ・小児（6歳以下）には使用しないでください。
- ・ゲルマニウム粒を万一飲み込んだ場合は、医師の診断を受け、指示に
従ってください。
- ・他の治療器と同時使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

平面図

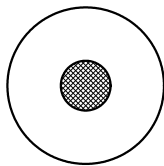

断面図

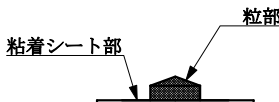

原材料

- 粒部 : ゲルマニウム
粘着シート部 : プラスター（絆創膏）
ライナー : はくり紙（紙の片面にシリコン樹脂を塗布したもの）

原理

ゲルマニウムの固形片と粘着シートからなるものであり、その物を
装着する事により、効果・効能として装着部位におけるコリの緩解を
目的とする製品。

【使用目的又は効果】

粘着テープの中央に粒状の硬質物を付し、身体のコリの部分に貼付
することにより圧迫し「コリの緩解」を目的とする器具。家庭におい
て使用する。

【使用方法等】

- ・コリのある部分に、必要に応じた粒数を貼ってご使用下さい。
- ・汗、汚れ、湿気などを取り、貼る部分を清潔にしてください。
- ・はくり紙から絆創膏を取ってください。
- ・コリのある部分に貼ってください。
- ・貼ったままの入浴が可能です。2～3日毎に貼り付け場所を変え
てください。長時間貼り付けると炎症を起こすおそれがあります。
- ・本品のゲルマニウム粒は何度でも使用可能です。

【使用上の注意】

- ・貼り付け場所の汚れなどは、カユミ、かぶれ、炎症の原因になりま
すので、清潔にしてからご使用ください。
- ・皮膚の弱い方は注意してご使用ください。
特に皮膚の敏感の方は、貼り付け場所を変え汗、汚れを除くことで
カユミ、かぶれ、炎症の予防になります。
- ・目の周囲や粘膜には使用しないでください。
- ・同じ場所に貼り続けると、カユミ、かぶれ、炎症が起こる場合があ
りますのでご注意ください。
- ・万一、カユミが生じた場合は、すぐにはがすか貼り付け場所をずら
してご使用ください。
- ・児童（7歳以上12歳まで）及び監督を必要とする場合は、保護者
の指導のもとに使用してください。
- ・万一、使用中異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し医師に相談
してください。
- ・お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ゲルマニウム粒を飲みこまないように気をつけてください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手の届かないところに、常温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・ご使用前には必ず傷、破損がないか確認してください。
異常があれば新しいものをご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者・製造業者

茨城県つくばみらい市陽光台一丁目1-2-510
有限会社 フジノ・アート

ご使用前に必ずお読み下さい