

びたサポ外反母趾サポーター


【警告】

アレルギー症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。


【禁忌・禁止】

- 体に異常を感じる時、または、装着部位に傷、腫れもの、湿疹等の疾患がある場合は使用しないでください。
- 就寝時は使用しないでください。
- きつく巻きすぎると血行不良の恐れがあります。きつく締めすぎないように装着してください。
- アレルギー体質、汗でかぶれやすい方は、使用しないでください。
- 高血圧、血行障害、糖尿病の方は、医師にご相談の上使用ください。
- 他の治療器と同時使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

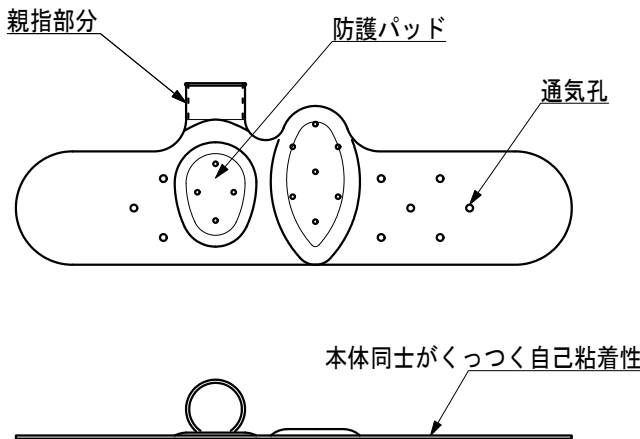

上図は右足用、親指部分を内側にひっくり返すと左足用になる。

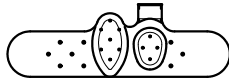

適応目安サイズ(約) / 足囲19~25cm

原材料

本体：エラストマー

原理


防護パッドが親指の基底に形成された腱膜瘤を防護し外部からの接触や衝撃からくる痛みを緩和する。
(腱膜瘤ができる要因としては、外反母趾などがある)

【使用目的又は効果】


親指の基底に形成された腱膜瘤を防護するために用いる家庭用の器具をいう。
なお、患部の変形や矯正を意図したものは除く。

【使用方法等】

- 左右兼用になっております。裏表どちらも使用いただけますので、使用する側の足に合わせて親指部分をひっくり返してご使用ください。
- きつく巻きすぎると血行不良の恐れがありますのできつく締めすぎないように装着してください。

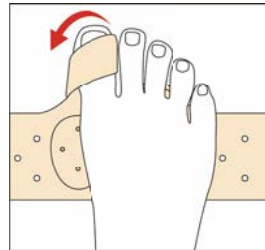

1. 親指にかける。

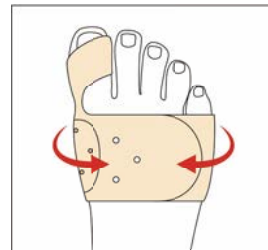

2. 防護パッドの位置を調整してから足の甲で重ねて貼り付けてください。

【使用上の注意】

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 初めて使用される場合は、体に変調や違和感がないか短い時間からお試ください。
- 使用中に異常を感じられた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
- 長時間ご使用になる場合や、締めすぎと感じる場合は、適度に着脱を繰り返してください。
- 着脱時の過度な引っ張りや爪などの鋭利なものによる傷は、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 就寝時の使用はお避けください。
- 適用目安サイズの範囲であっても、圧に弱い方、不快感を感じる方血行不良の恐れがありますので使用しないでください。
- 製品の改造は行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- お客様の手の届かないところに、常温で保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- 自己粘着性のためホコリのない場所で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- 肌の角質や汚れなどで吸着力が低下した場合は水で洗浄してください。
- 汚れの酷い場合は中性洗剤を使用し洗ってください。
その後ホコリのない場所で自然乾燥してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

有限会社 フジノ・アート
茨城県つくばみらい市陽光台一丁目1-2-510

発売元

株式会社 メイダイ
愛知県清須市新清州6-7-2
0120-55-4383

ご使用前に必ずお読み下さい