

びたサポ指関節サポーター


【警告】

アレルギー症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

【禁忌・禁止】

- ・体に異常を感じる時、または、装着部位に傷、湿疹等の疾患がある場合は使用しないでください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・きつく巻きすぎると血行不良の恐れがあります。きつく締めすぎないように装着してください。
- ・アレルギー体質、汗でかぶれやすい方は、使用しないでください。
- ・高血圧、血行障害、糖尿病の方は、医師にご相談の上使用ください。
- ・他の治療器と同時使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

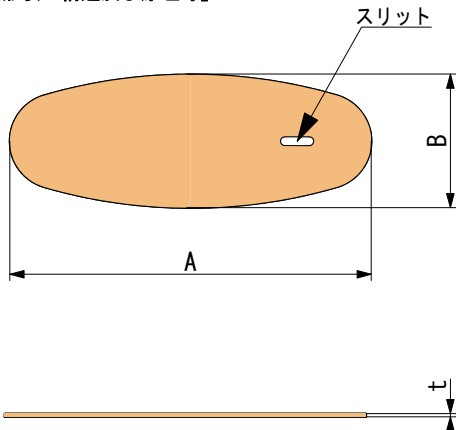

寸法

A = 9.5 mm
B = 3.5 mm
t = 0.5 mm

原材料

本体：シリコン

原理


伸縮性、弾力性のあるシリコンを使用することにより、ヘバーデン結節やリウマチ等で受傷した指を保護し、外からの物理的な衝撃による痛みを緩和する。

【使用目的又は効果】

受傷した指を治癒過程でこれ以上の外傷から保護するために用いることを目的とした器具
本品は再使用可能である。

【使用方法等】

- ・光沢のある面を内側にご使用ください。
- ・軽く引っ張りながら巻き付けてください。
- ・きつく巻きすぎると血行不良の恐れがあります。

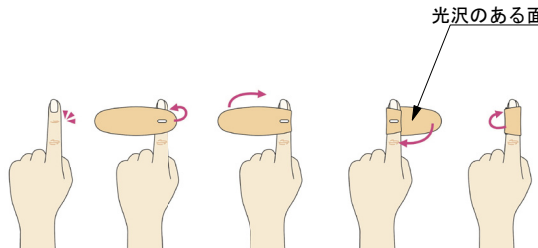

スリット部を指関節に合わせ軽く引っ張りながら巻き付けてください。

【使用上の注意】

- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・使用中に異常を感じられた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
- ・長時間ご使用になる場合や、締めすぎと感じる場合は、適度に着脱を繰り返してください。
- ・着脱時の過度な引っ張りや爪などの鋭利なものによる傷は、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・就寝時の使用は避けください。
- ・製品の改造は行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手の届かないところに、常温で保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ・自己粘着性のためホコリのない場所で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・肌の角質や汚れなどで吸着力が低下した場合は水で洗浄してください。
- ・汚れの酷い場合は中性洗剤を使用し洗ってください。
- ・その後ホコリのない場所で自然乾燥してください。
- ・ご使用前には必ず傷、破損がないか確認してください。
- ・異常があれば新しいものをご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

有限会社 フジノ・アート
茨城県つくばみらい市陽光台一丁目1-2-510

発売元

株式会社 メイダイ
愛知県清須市新清州6-7-2
0120-55-4383

ご使用前に必ずお読み下さい