

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（JMDN:70722000）
トランスファーコーピング C L（P F φ4.4）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞


- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。
〔「相互作用」の項参照〕

＜使用方法＞

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

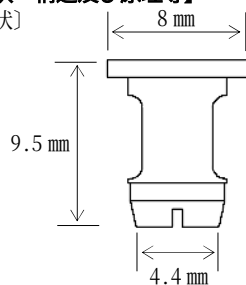

径	PFφ4.4
適応	Type I・IIの φ3.3 φ3.7 φ4.0 用
カラー	白色

〔材質〕 ポリアセタール

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの補綴物の設計・製作に用いる器具で、口腔内でのインプラント及びアバットメント位置関係を作業模型上に再現するためのトランスファー印象に用いる。

【使用方法等】

1. 通法に従って術前診査・フィクスチャ埋入・治癒期間終了後、ヘッドを装着する。
2. 本品をフィクスチャに装着し、印象採得を行う。
3. 印象後、トランスファーレプリカ又はヘッドオンレプリカを印象面の本品に装着し、通法に従って作業用模型を作製する。
4. 通法に従って補綴物を作製する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

1. 本品は未滅菌品のため、使用前に必ず洗浄の上、オートクレープで滅菌を行うこと。なお、オートクレープ時に本品をヒーター近傍に設置しないこと。また、ヒーター乾燥は避けること。〔ヒーターの熱で変形する可能性がある。〕
洗浄条件：局方精製水にて超音波洗浄
滅菌条件：121℃ 30 分間
2. 本品は、プラトンインプラント Type I・II と組み合わせて使用する。埋入されているインプラント径がφ3.3、φ3.7、φ4.0 の際に使用すること。インプラント径がφ4.5 の場合は、トランスファーコーピング C L（P F φ4.8）を使用すること。
3. 本品は、フィクスチャのマージン部が粘膜縁下 2 mm 以上の場合は使用しないこと。
4. 印象採得時及びトランスファーレプリカ（又はヘッドオンレプリカ）への装着時は、フィクスチャのマージン部（及びヘッドのカット面）がしっかり嵌合していることを確認すること。
5. 印象採得は模型上に正確な位置関係でトランスファーを行うため、シリコン印象材を使用すること。使用するシリコン印象材はインプラントの精密印象に適した硬さ・弾性率のものを使用すること。（低粘度タイプのもの使用しないこと）

【使用上の注意】

1. 相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）
〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

【取扱上の注意】

1. 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 プラトンジャパン ワールドイタル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル
T E L 042-734-8088（代） F A X 042-737-6708

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照下さい。