


機械器具 58 整形用機械器具 一般医療機器 手術用ドリルアタッチメント (JMDN:37870001) ドリルエクステンション

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

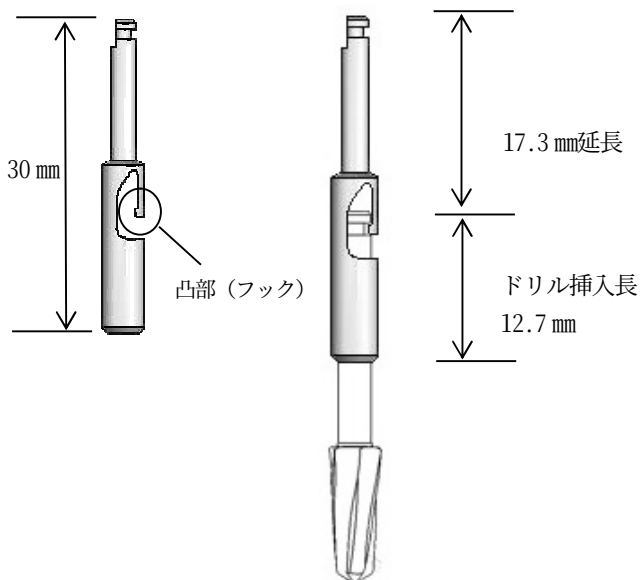

【構造原理】 本品の凸部（フック）でドリルのシャフト部を抑えることにより機能する。



【材質】 ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は顎骨の穿孔を行う際に、ハンドピースの隣に歯等への接触を防ぐため、動力式等のハンドピースに接続し、歯科用ドリルを延長するためのアタッチメントとして用いる。本品は再使用可能である。

**【使用方法等】

1. 本品は未滅菌品のため、使用前に洗浄の上、オートクレーブで滅菌を行うこと。
洗浄条件：局方精製水にて超音波洗浄
滅菌条件：121℃で 30 分間
2. 本品をハンドピースに接続し、使用するドリルを装着し、通法に従って骨の穿孔等を行う。
3. ドリルを外す際は、真っ直ぐ引き抜くように外す。

【使用方法に関する使用上の注意】

1. 誤って患者の口腔内にドリル等を落下させ誤飲、誤嚥させないよう、装着には十分注意し、しっかり装着されているか確認を行うこと。
2. 本品はショートサイズのドリルを延長することを目的としており、使用の際、ドリルの軸方向、軸トルク以外の荷重をかけないこと。〔破折の恐れがあるため。〕
3. 本品を使用して骨の穿孔を行う場合は、骨火傷を防ぐため、術野への十分な注水を行うこと。
4. ドリルにドリルストッパーを装着する場合、本品と干渉しないことを確認すること。
5. 本品は内部注水式のドリルには使用しないこと。

6. 破損の恐れがあるため、ドリルの着脱時にフック部をプライヤーで抑えたり曲げたりしないこと。
7. ドリルの着脱時に、ドリルの刃部で手指を傷つけないように注意すること。

**【使用上の注意】

1) 基本的な注意

1. 本品の使用前に、組み合わせて使用するドリルを装着し、スムーズな着脱と適度な嵌合状態を保つことの確認を行うこと。
2. 使用前にコントラングルハンドピースに装着し、患者の口腔外にて回転させ、芯ブレなど支障がないことを確認すること。
3. コントラングルハンドピースへの取り付け時は、確実に奥まで挿入し、固定されていることを確認すること。
4. 器具の正しい使用のために、注意事項に従うこと。
5. 変形や破損の生じた製品は使用しないこと。

2) 相互作用（他の医療機器との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は、当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

^^【取扱い上の注意】

1. 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 使用後は、血液などの凝固を防ぐため、直ちに拭き取るか防錆殺菌液入りのシャーレ等に入れること。
4. 超音波洗浄の際、金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性水などは使用しないこと。
5. 洗浄・乾燥時は他の金属材料のツールと分け、また一本ずつガーゼで巻くなど取り扱いには十分注意すること。
6. 洗浄液使用後は十分水洗いし、洗浄後の乾燥は十分に行うこと。また、洗浄後は極力素手で扱わないようにすること。
7. ステンレス鋼は、使用方法、環境により錆びることがあるので、洗浄、乾燥、保管には十分注意すること。
8. 「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
9. 本品を加工、改造することは破損の原因となるので行わないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアル等を必ず参照下さい。