

機械器具 58 整形用機械器具 一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN:70965001） ドライバホルダ


【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。
〔「相互作用の項」参照〕

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

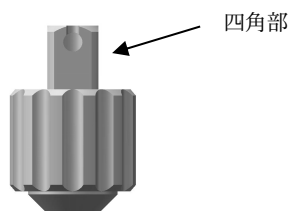

ドライバホルダ

〔材質〕 ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる器具で、コントラを使用するツールに装着し、手指で操作を行うためのアダプターとして使用する。

**【使用方法等】

1. 本品は未滅菌品のため、使用前に洗浄の上、オートクレーブで滅菌を行う。
洗浄条件：局方精製水にて超音波洗浄
滅菌条件：121℃ 30分間
2. 本品を使用するツールに装着し、手指又はラチェットにて操作を行う。

【使用上の注意】

1. 基本的な注意
 - ・術前に必ず組み合わせて使用する製品との着脱の確認を行うこと。正しく装着されたことを確認の上、使用すること。
2. 相互作用（他の医療機器との併用に関すること）
〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
JIS T5504-1 に則ったシャंक部形状以外の製品	本製品は、当社が指定する製品（JIS T5504-1 に則ったシャंक部形状）と組み合わせて使用するよう設計されているため、指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある

**【取扱い上の注意】

1. 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 血液が付着した場合、使用後に直ちに拭き取るか、防錆殺菌液入りのシャーレ等にいれること。〔血液が凝固すると錆びや汚染を引き起こすおそれがある。〕
4. 超音波洗浄の際、金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性水などは使用しないこと。

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照下さい。