

機械器具 58 整形用機械器具 一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN:70965001） TMベンディングツール

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。
〔「相互作用の項」参照〕

＜使用方法＞


- ・本品はプラチンTMインプラント以外には使用しないこと。

*【取扱い上の注意】

- (1) 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- (3) 使用後は、血液などの凝固を防ぐため、直ちに拭き取るか防錆滅菌液入りのシャーレ等に入れること。
- (4) 超音波洗浄の際、金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性水などは使用しないこと。
- (5) 洗浄・乾燥時は他の金属材料のツールと分け、また一本ずつガーゼで巻くなど取り扱いには十分注意すること。
- (6) 洗浄液使用後は十分水洗いし、洗浄後の乾燥は十分に行うこと。また、洗浄後は極力素手で扱わないようにすること。
- (7) ステンレス鋼は、使用方法、環境により錆びることがあるので、洗浄、乾燥、保管には十分注意すること。
- (8) 「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

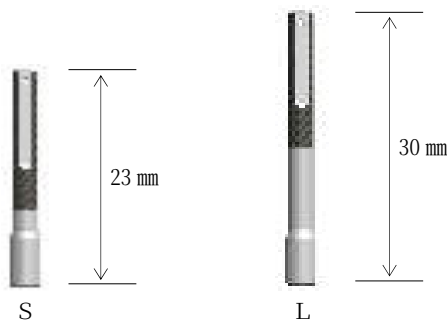

2) 材質 ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる器具で、口腔内に植立されたTMインプラントの平行性を調整するために使用する。本品は再使用可能である。

*【使用方法等】

1. 本品は未滅菌品のため、オートクレーブで滅菌を行う。
滅菌条件：121℃ 30 分間
2. 口腔内に植立されたTMインプラントの平行性を調整するため、本品をTMインプラントに装着し、TMインプラントをネック部で注意深く曲げる。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用前・使用後に破損、キズ等の異常がないかを確認すること。これらがある場合には、使用を中止すること。
- (2) 誤って患者の口腔内に落下させ、誤飲・誤嚥させないように注意すること。
- (3) 組み合わせて使用する製品は、適度な嵌合状態を保つことを術前に確認するとともに、使用時においても確実に嵌合していることを確認すること。
- (4) 本品の使用時に、TMインプラントを繰り返して曲げたり過度にひねったりしないこと。〔TMインプラントの強度の低下につながり、破折することがある。〕

2. 相互作用（他の医療機器との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は、当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されている。指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950

東京都町田市大蔵町 56 鶴川アカデメイアビル

TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708