

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN：70965001）
ボーンプロテクター


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・記載の使用目的以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

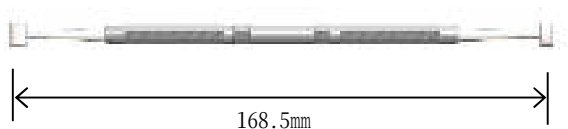

〔材質〕

ハンドル部 : ステンレス鋼
先端部 : 純チタン

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術において、骨幅の拡大、インプラント窩の形成を行う際に、骨の裂開を防止するために用いる器具である。

**** 【使用方法等】**

- （1）本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄の上、オートクレープで滅菌を行う。
洗浄条件：局方精製水にて超音波洗浄
滅菌条件：121℃ 30 分間
- （2）本品を唇頬側の骨面にあてながらナロースプレッダー又はボーンプレッダーを使用し、骨幅の拡大、インプラント窩の形成を行う。

（併用医療機器）

本品は以下の医療機器に使用する。

販 売 名	製造販売届出番号
ナロースプレッダー	20B1X00007000048
ボーンプレッダー	20B1X00007000004

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・使用前・使用後に変形、破損、キズ等の異常がないかを確認すること。これらがある場合には、使用を中止すること。

*** 【取り扱い上の注意】**

- （1）直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- （2）歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- （3）使用後は、血液などの凝固を防ぐため、直ちに拭き取るか防錆滅菌液入りのシャーレ等に入れること。
- （4）超音波洗浄の際、金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性水などは使用しないこと。
- （5）洗浄・乾燥時は他の金属材料のツールと分け、また一本ずつガーゼで巻くなど取り扱いには十分注意すること。
- （6）洗浄液使用後は十分水洗いし、洗浄後の乾燥は十分に行うこと。また、洗浄後は極力素手で扱わないようにすること。
- （7）本品は、使用方法、環境により錆びることがあるので、洗浄、乾燥、保管には十分注意すること。
- （8）「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- （9）本品の加工・改造・改良は破損の原因となるので行わないこと。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

株式会社プラトンジャパン 777-777 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル
T E L 042-734-8088（代） F A X 042-737-6708

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照下さい。