

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品（JMDN：31836030）
OT アタッチメント

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

・当社が指定する製品以外には使用しないこと。
（[相互作用]の項参照）

【形状・構造及び原理等】

[構成品]

本品は単品又はキットの一部として流通される。



シングルハウジング
ノーマル（緑）・マイクロ（赤）



ポジショニングリング
ノーマル（緑）・マイクロ（赤）



キャストابلシングルスフィア
ノーマル（緑）・マイクロ（赤）




ベベルドキャストابلバー
ノーマル（緑）
マイクロ（赤）



ストレートキャストابلバー
ノーマル（緑）
マイクロ（赤）



クラシックバー
ノーマル（黄＋緑）
マイクロ（黄＋赤）

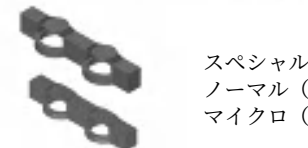

スペシャルバー
ノーマル（緑）
マイクロ（赤）



コネクター（黄）



キャストابلピボット・ノーマル
14 mm（黄）
12 mm（白）
10 mm（緑）
9 mm（赤）
7 mm（黒）



キャストابلピボット・マイクロ
10 mm（緑）
9 mm（赤）
7 mm（黒）

[原材料]

ポリスチレン

【使用目的又は効果】

本品は修復物の製作に用いる既製パターンである。本品は鋳造により金属に置き換えて使用する。

【使用方法等】

症例に応じて適切なパーツを選択し、作業模型上で通法に従い、技工作業によって形状を整えたのち鋳造し、床義歯の維持装置等の修復物を作製する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

本品はOTキャップに使用する。
なお、コネクターについてはOT EQUATORキャップにも使用可能である。

【使用上の注意】**1) 重要な基本的注意**

- (1) 本品は口腔内では使用しないこと。
- (2) ノーマルサイズとマイクロサイズの混同に注意すること。
- (3) キャスタブルシングルスフィア、キャストابلバー及びキャストابلピボットのボール部に対して切断・加工等は行わないこと。[床義歯の維持力が得られなくなる。]

2) [相互作用]（他の医療機器との併用に関すること）

[併用禁忌・禁止]（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は、当社が指定する製品と組み合わせで使用するように設計されていません。指定以外の製品とは組み合わせで使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社プラトンジャパン

東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル

TEL 042-734-8088（代）FAX 042-737-6708

製造業者

ライン 83 エスアールエル（RHEIN 83 S.r.l.）イタリア