

機械器具17 血液検査用器具  
一般医療機器 乾式臨床化学分析装置 (34549000)  
特定保守管理医療機器

## 富士ドライケムNX700 富士ドライケムNX700i

### 【警告】


プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者において、実際の血糖値より高値を示すおそれがあるので、プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者における血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手すること。[プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある。]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

本装置は、以下のユニットからなる本体と付属品により構成されます。

1. 検体ディスク部
2. サンプラー部
3. インキュベーター部
4. 測定部
5. 付属品（詳細は各付属品の電子化された添付文書を参照してください。）  
富士ドライケム プラズマフィルター PF  
富士ドライケムスライド Hb-WII  
富士ドライケムスライド Na-K-CI

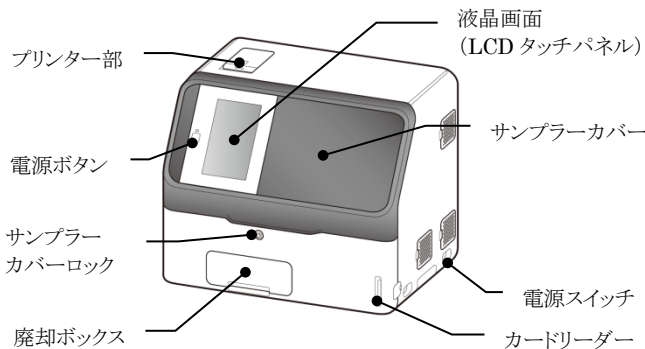

#### 外形寸法及び重量

幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
500	380	410	33

電氣的定格 電圧： 単相 AC 100V ±10%  
電流： 3A  
周波数： 50 又は 60Hz

#### 設置環境

- (1) 水等がかからない場所に設置してください。
- (2) 水平で振動のない安定した場所に設置してください。
- (3) 直射日光の当たらない室内（6000ルクス以下=6000cd/m<sup>2</sup>以下）で使用してください。
- (4) 装置を使用の際は下記の設置環境条件を守ってください。  
動作時 温度：15～32℃  
湿度：30～80%RH（結露なきこと）

#### 【動作原理】

1. 検体は自動的にサンプリングされて、富士ドライケムスライド（以下、「スライド」と記述）上に滴下されます。
2. 検体が滴下されたスライドは、一定温度に制御管理され、スライド内の反応を光学的又は電氣的に測定します。

### 【使用目的又は効果】

本装置は、乾式臨床化学分析装置に属するものであり、スライドを使い、血液、尿を分析する医用検体検査機器です。

### 【使用方法等】

#### 【装置の使用方式】

1. 測定を始めるとき  
始業前の点検を行い、指定された電源を入れてください。
2. 検体の測定  
測定する検体、スライド、消耗品などを準備し、測定してください。
3. 測定を終わるとき  
測定が終了しており、モード処理も行っていないことを確認し、使用後の終業点検を行い、指定された電源を切ってください。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断すること。
2. 精度管理を行い、装置が正常に動作していることを確認すること。
3. 検体或使用済みの消耗品を取り扱うときは、必ず手袋を使用すること。
4. スライド、チップ、混合カップなど消耗品は取扱説明書に指定された専用品を使用すること。スライドは医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品、又は医療機器の付属品です。スライドの電子化された添付文書を参照すること。
5. 測定を開始する際は、液晶画面に「測定できます」が表示されていることを確認すること。
6. サンプリング動作中は、必ずサンプラーカバーを閉じ、カギをロックし、怪我やバイオハザードを防止すること。検体を内部に吸引したチップに手指が触れると、検体が飛び散り、感染の可能性があります。

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

1. 測定を開始する前や測定中に機器異常（エラー）が表示されたとき、或いは、測定結果にワーニングが表示されたときの測定値は正しくない場合があります。取扱説明書の「異常時の対処法」を参照して再測定すること。
2. この装置は防爆型ではないため、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
3. 装置の固定されたカバーを開けた状態で使用しないこと。けがや感電するおそれがあります。
4. 装置のアースが確実に接続されていること。
5. 装置を使用の際は設置環境を守ること。
6. 移設する場合、又は電源接続等が必要な場合は、弊社又は弊社指定の業者に連絡すること。
7. 使用後は、電源を必ず切ること。
8. 装置に不具合が発生した場合（異常な音、臭い、煙などが発生した場合）は、直ちに電源を切り「故障中」等の適切な表示を行い、弊社又は弊社指定業者に連絡すること。
9. 本装置での血糖値測定においては、【警告】欄に記載のプラリドキシムヨウ化メチルの影響は受けません。

#### 【相互作用】

1. 本装置の傍での携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置に障害を及ぼすおそれがあるので、使用しないこと。
2. 指定された機器以外の装置を接続した場合、所定の EMC 性能を発揮できない。

**【その他の注意】**

1. 使用済みのスライド、点着用チップ等検体の付着したものは感染性産業廃棄物に該当するので、関連する法に従い、焼却、溶解、滅菌、消毒などの処理をすること。  
また、委託を行う場合は、特別管理産業廃棄物処理業の免許を持った業者に特別管理産業廃棄物管理票（マニフェスト）を添えて処理依頼すること。
2. 検体が装置に付着した場合には、速やかに清掃・消毒等を行うこと。
3. 装置を廃棄する場合、血液などの検体が付着して汚染された可能性があるものは、感染性産業廃棄物に該当するので、関連する法に従い、適正な処理を行うこと。
4. 本装置は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに準拠した環境のネットワークで使用する。
5. ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータウイルスおよび情報の漏洩等に注意すること。
6. セキュリティの確保された病院内のネットワークに接続して使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 耐用期間  
装置本体の耐用期間は、使用上の注意を守り、正規の保守・点検を行った場合に限り納入後6年間です。  
〔自己認証(当社データ)による〕

**【保守・点検に係る事項】**

1. 医用機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
2. 使用者による保守点検事項、業者による保守点検事項を必ず行ってください。  
使用者による保守点検事項の詳細については、取扱説明書を参照してください。
3. 保守点検で取り外した部品、手ネジなどは、確実に取り付けてください。

**【使用者による保守点検事項】**

点検項目	頻度
①エアフィルター清掃	1か月
②搬送バーの清掃	3か月。または、測定値に異常があったときに適宜行う。
③インキュベーター部の清掃	
④点着部の清掃	
⑤スライド読取部の清掃	スライド搬送不良が発生したときやチップの廃却不良が発生したときなど、適宜行う。
⑥PF センサーの清掃 (※1)	PF 抽出時に異常が発生したときなど、適宜行う。
⑦PF 基準板の清掃 (※1)	
⑧PF 吸盤の清掃 (※1)	
⑨PF 吸盤の点検 (※1)	1か月
⑩電解質部の清掃	3か月。または、測定値に異常があったときに適宜行う。
⑪参照液蓋パッキンの清掃	参照液交換時
⑫記録用紙の交換	紙の両端に赤線が出てきたとき
⑬光源ランプの交換	ランプ交換エラーが発生したとき、又は点灯累積時間が1000時間を超えたとき
⑭サンプラーOリングの点検	1か月
⑮サンプラーOリングの交換	1年
⑯PF チューブの交換 (※1)	1年。 または1か月以上PFの未使用状態が続いたとき
⑰参照液蓋パッキンの交換	3か月
⑱PF 吸盤の交換 (※1)	1年

※1：富士ドライケムNX700iには適用されません。

**\* [業者による保守点検事項]**

点検項目	頻度
①インキュベーター押さえ板の点検	3年
②シリンジ	3年
③干渉フィルター	4年 ただし、シリアルナンバー(SN)の下5桁が50000以上の装置は点検項目対象外。

点検項目の頻度は、使用量や1日の稼働時間により異なります。

クリーニングおよびメンテナンス作業は、弊社指定の業者に訓練を受けてから実施してください。

業者による保守点検事項については、弊社又は弊社指定の業者にお尋ねください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者： 富士フイルム株式会社  
(電話番号) 0120-771669

\* 販売業者： 富士フイルムメディカル株式会社  
(電話番号) 0570-02-7007

\*\*サイバーセキュリティに関する情報請求先

《製造販売業者と同じ》

<https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/security-information>

取扱説明書を必ずご参照ください。

897N203175C