

機械器具 17 血液検査用器具
一般医療機器 免疫発光測定装置 (36223010)

自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed SG720 の付属品


アキュラシード 上部フィルター (SG)

アキュラシード 下部フィルター (電源部) (SG)

アキュラシード 下部フィルター (クーリングユニット用) (SG)


【使用方法等】

＜上部フィルターの交換方法＞

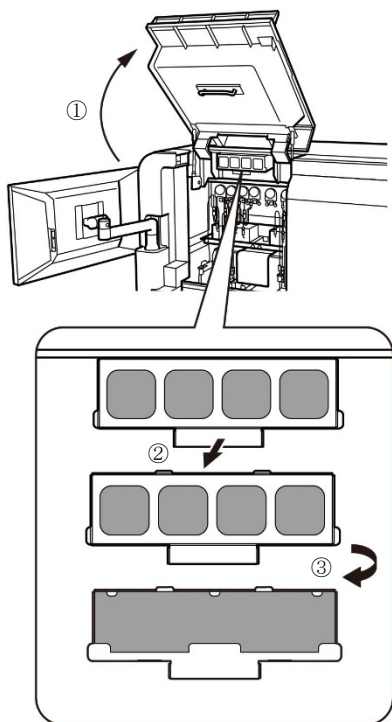

- ① 反応ラインカバーを開けます。
- ② フィルターブラケットの取っ手を引いて取り外します。
- ③ ブラケット裏側から上部フィルターを取り外して、新しいフィルターと交換します。
- ④ フィルターブラケットを元の位置に戻します。
- ⑤ 反応ラインカバーを閉めます。

＜下部フィルター (電源部)、下部フィルター (クーリングユニット用) の交換方法＞

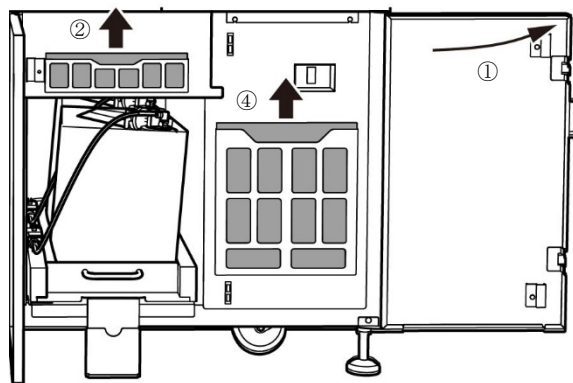

- ① 右扉を開けます。
- ② B/F分離液上側の下部フィルター (電源部) を上に引き出します。
- ③ 新しいフィルターを上から差し込みます。
- ④ 電源スイッチ下側の下部フィルター (クーリングユニット用) を上に引き出します。
- ⑤ 新しいフィルターを上から差し込みます。
- ⑥ 右扉を閉めます。

※ 本体の電子化された添付文書および取扱説明書を必ず参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 富士フイルム株式会社
(電話番号) 0120-771669

販 売 業 者： 富士フイルム和光純薬株式会社
(電話番号) 06-6203-3741 (代表)