

送ガスチューブ CT-11G

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

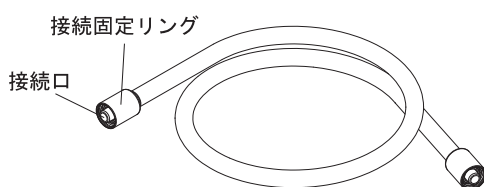


図1

1. 仕様

項目	諸元
全 長	1m

2. 動作環境

温 度：+10 ～ +40℃

湿 度：30 ～ 85%RH（結露状態を除く）

気 圧：70 ～ 106kPa（大気圧範囲）

＜作動・動作原理＞

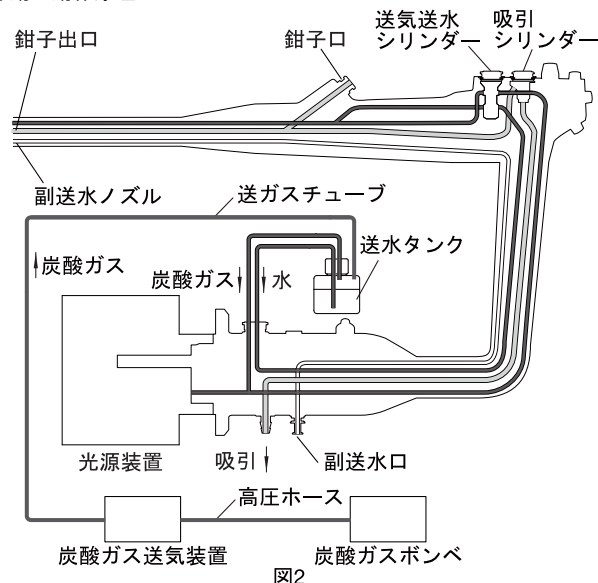


図2

内視鏡の送気送水管路は常に炭酸ガス送気装置より炭酸ガスが供給されている。

送ガス送水ボタン穴をふさぎながら半分程度押し込むことにより先端まで管路がつながり先端より炭酸ガスが吹き出す。更に送ガス送水ボタンを押し込むと、送気管路が塞がれ、炭酸ガスは送水タンクに流れ込む。炭酸ガスは送水タンク内の水を押し出し、水は管路内を流れ、先端より吹き出す。

【使用目的又は効果】

本製品は、内視鏡用炭酸ガス送気装置から内視鏡へ炭酸ガスを供給するためのチューブである。

【使用方法等】

＜使用方法＞

- 用途に応じたレベルの消毒または滅菌を行った送ガスチューブを用意する。
- 送ガスチューブに傷や亀裂などの異常および水気がないことを確認する。
- 送ガスチューブの一方の接続口を炭酸ガス送気装置の送ガスコネクターへ挿し込み、接続固定リングを時計回りに回してしっかりと固定する。
- 送水タンクの送ガスチューブ接続部の保護キャップを開ける。送ガスチューブのもう一方の接続口を送水タンクの送ガスチューブ接続部へ挿し込み、送ガスチューブの接続固定リングを時計回りに回してしっかりと固定する。
- 炭酸ガス送気装置の取扱説明書に従って、確実に送水および送気されることを確認する。
- CO2 ガスポンペを接続している場合は、CO2 ガスポンペのバルブを時計回りに回してしっかりと閉める。医療ガス配管設備に接続している場合は、医療ガス配管中継ホースをホースアセンブリから取り外す。
- 送ガスチューブを炭酸ガス送気装置から取り外す。
- 送ガスチューブを送水タンクから取り外す。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

本製品は以下の医療機器と組み合わせて使用する。

販売名	承認・認証・届出番号
内視鏡用炭酸ガス送気装置 GW-100	225AABZX00133000
送水タンク WT-04G	14B1X10022A00010

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 初めて使用するとき
 - 本製品は、あらかじめ滅菌されていない。初めて使用する場合は、本製品の取扱説明書の手順に従って、用途に適したレベルの消毒または滅菌を行うこと。
- 準備と点検
 - 本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。
- 手入れ方法
 - 1 日の症例が終わるごとにただちに洗浄および消毒または滅菌を、本製品の取扱説明書の手順に従って十分に行うこと。洗浄液や消毒液が残って、感染や、機器が損傷するおそれがある。
- 洗浄・消毒・滅菌
 - 本製品は、あらかじめ滅菌が行われていない。使用するときは、用途に応じたレベルの洗浄、消毒または滅菌を行うこと。
 - 使用後には本製品の取扱説明書の手順に従って洗浄し、消毒または滅菌を行うこと。不十分な洗浄は、感染の原因になる。
 - 消毒を行うときは、十分に換気すること。浸漬槽のふたを閉めて浸漬すること。消毒液の蒸気は、人体に悪影響を与えるおそれがある。
 - 薬液浸漬後は、残留している薬液を滅菌水で洗い流すこと。消毒液が患者の体内に流れ込むおそれがある。
- 保管
 - 送ガスチューブは、乾燥してから保管すること。感染のおそれがある。

取扱説明書を必ずご参照ください。

FQ19A 897N202593B

2308-2.0

* **【使用上の注意】**

* **＜不具合・有害事象＞**

本製品の使用に伴い、以下のような有害事象が起こる可能性がある。

ガス塞栓症、感染、感電、損傷、炎症、検査中断、腹部膨満

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

本製品は下記の条件（温度、湿度、気圧）を満たす清潔な場所で保管すること。

保管条件

温度：-10～+45℃

湿度：30～95%RH（結露状態を除く）

気圧：70～106kPa（大気圧範囲）

* **＜有効期間＞**

有効期間は適切な保守点検を行った場合、使用開始から 1 年間とする。

「自己認証（弊社データ）による」

本製品は、消耗品である。

本製品の取扱説明書の手順に従って、使用前点検を実施し、異常がある場合は新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検の詳細は、取扱説明書を参照すること。

＜使用者による保守点検事項＞

点検項目	頻度
送ガスチューブに傷や亀裂などの異常がないことの確認	毎症例

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL：0120-771669

* 販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL：0570-02-7007（ナビダイヤル）